

ATTENZIONE

Esiste un potenziale rischio di lesioni gravi o morte associate praticamente a tutti i prodotti, indipendentemente dal tipo o l'uso previsto. Stander, Inc., ha lavorato instancabilmente per ridurre al minimo tutti i rischi associati ai suoi aiuti alla mobilità dati i tipi di prodotti, gli utenti e una miriade di cose al di fuori del nostro controllo, non possiamo eliminarli tutti rischio immaginabile. Di conseguenza, un consumatore deve usare il buon senso quando utilizza i nostri prodotti e tenerne conto tenere conto della salute fisica e mentale generale dell'utente.

Leggere tutti i materiali che accompagnano questo prodotto prima di installarlo o utilizzarlo.

GARANZIA LIMITATA

Stander, Inc. garantisce all'acquirente originale che questo prodotto sarà privo di difetti nei materiali e / o nella lavorazione per 1 anno dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, correggeremo qualsiasi difetto nel materiale o nella lavorazione senza alcun addebito. Tutte le spese di spedizione devono essere a carico dell'acquirente originale. Eventuali parti di ricambio saranno nuove e garantite per il resto della garanzia originale o trenta (30) giorni dalla data di spedizione, a seconda di quale sia la durata più lunga. L'acquirente originale deve notificare Stander, Inc. durante il periodo di garanzia per iscritto del difetto di fabbricazione o materiale. Questa garanzia non è trasferibile e copre solo l'uso normale. Stander non rimborserà né pagherà le spese di spedizione. La garanzia NON copre: (1) Damage durante la spedizione diversa dalla spedizione originale al rivenditore; (2) danni causati da allegati, alterazioni o modifiche non autorizzati; (3) danni causati dall'uso del prodotto per scopi diversi da quelli per i quali il prodotto è stato progettato o curato; e (4) danni causati da qualsiasi altro abuso, uso improprio, cattiva gestione o errata applicazione.

In nessuna circostanza Stander, Inc. potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni speciali, incidentali o consequenziali basati sulla violazione di questa garanzia limitata, violazione dei contratti o responsabilità oggettiva.

NON CI SONO GARANZIE CHE SI ESTENDONO OLTRE QUELLI INDICATI QUI. TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE (COMPRESSE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE), SONO ESCLUSIVE.

Alcune norme non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile. Questa garanzia ti dà un diritto legale specifico e potresti anche avere altri diritti che variano da stato a stato. Per ottenere assistenza in virtù di questa garanzia, è possibile contattare Stander, Inc. al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453.

AVVERTENZE

1) INSTALLAZIONE:

- a) Non utilizzare o installare questo prodotto a meno che non si leggano e comprendano queste avvertenze e istruzioni di assemblaggio per assicurarsi che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente. Se l'installatore / gli utenti installano questo prodotto in una casa di cura, in un centro di assistenza assistito o in una struttura simile, seguire queste e le politiche di installazione della guida del letto della struttura. In caso di domande relative all'installazione, all'utilizzo, ai rischi associati o qualsiasi altra cosa relativa a questo prodotto, chiamare Stander Inc. al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453.
- b) Un'installazione errata di questo prodotto aumenta significativamente il rischio di intrappolamento (vedere la sezione ENTRAPMENT più avanti). NON installare il prodotto senza giroletto in nessun caso. NON utilizzare il prodotto senza cinturino di sicurezza. Non installare questo prodotto se non si è in grado di seguire esattamente le istruzioni.
- c) Questo prodotto deve essere utilizzato solo con materassi a molle o memory foam da 11 pollici a 16 pollici di spessore. Questo prodotto non deve essere utilizzato su alcun letto costituito da un materiale che può aumentare il potenziale di intercapedine tra la parte superiore del materasso e la parte inferiore della sponda del letto. Esempi di letti che causano problemi di spazio sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, letti ad acqua, schiuma leggera, materassi ad aria o altri materassi leggeri, materassi che comprimono più di 1 "sul bordo durante l'uso e letti con telai regolabili.
- d) Prima dell'uso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il lato della sponda del letto e il lato del materasso. Una lacuna in quest'area significa che il prodotto è stato installato in modo errato. La cinghia di sicurezza inclusa è progettata per fissare la sponda del letto al lato di un materasso per evitare uno spazio in questa zona.
- e) La bedcane (articolo n. 2041) è dotata di una cinghia di sicurezza intesa a ridurre il rischio di intrappolamento (vedere la sezione ENTRAPMENT più avanti). Non rimuovere MAI la cinghia di sicurezza o utilizzare il prodotto senza la trappola di sicurezza S installata secondo le istruzioni di montaggio. La rimozione, la modifica o l'alterazione della cinghia di sicurezza aumenta significativamente il rischio di intrappolamento.

2) ENTRAPMENT:

- a) Esiste il rischio di intrappolamento associato alle sponde del letto e ad altri ausili per la mobilità sul letto simili. L'intrappolamento si verifica quando un individuo viene incuneato tra una sponda del letto e qualsiasi altro oggetto. L'intrappolamento ha provocato lesioni gravi e morte. Leggere le Linee guida per la prevenzione degli intrappolamenti allegate prima dell'installazione o dell'uso di questo prodotto. È possibile ottenere copie aggiuntive delle Linee guida per la prevenzione dell'intrappolamento da www.stander.com o contattando un rappresentante Stander al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453.

3) CONDIZIONI FISICHE E MENTALI:

- a) Individui che hanno problemi con limitazioni fisiche, paralisi, sintomi di demenza, Alzheimer o perdita di memoria, sonno, incontinenza, dolore, movimento incontrollato del corpo, alzarsi dal letto e camminare senza sicurezza senza assistenza, fragilità, debolezza, confusione, irrequietezza, irrequietezza terminale, o sono sotto l'influenza di farmaci, droghe o altre sostanze che potrebbero comprometterne l'equilibrio o il giudizio, o qualsiasi altra ragione imprevedibile che potrebbe influenzare la capacità fisica e mentale degli utenti di usare questo prodotto in sicurezza, sono a maggior rischio di intrappolamento. Se in queste condizioni sono soggettivi e Stander Inc. non ha alcun controllo su chi sceglie di utilizzare questo prodotto, è l'utente (s) la responsabilità dell'installatore di consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto.
- b) Questo prodotto non è destinato a sostenere l'intero peso di un individuo. Questo prodotto ha lo scopo di fornire equilibrio e supporto solo seduti e in piedi.

4) FATTORI ESTERNI:

- a) Ai bambini non dovrebbe essere permesso di aggrapparsi o giocare con questo prodotto.
- b) Il cambio della biancheria da letto (copriletto, coperte, lenzuola, ecc.) può richiedere una nuova regolazione della cinghia di sicurezza per eliminare uno spazio tra la sponda del letto e il lato del materasso.
- c) Se il prodotto viene rimosso e reinstallato, la cinghia di sicurezza deve essere reinstallata correttamente come indicato nelle presenti istruzioni.

5) ACCORDO TRA INSTALLATORE / SERIE U. E STANDER INC .:

- a) Se l'installatore / gli utenti scelgono di usare questo prodotto, si intende tra l'installatore / gli utenti E Stander Inc. che l'installatore / gli utenti accettano i rischi associati all'uso di questo prodotto. Poiché queste condizioni sono soggettive e Stander Inc. non ha alcun controllo su chi sceglie di utilizzare questo prodotto, l'installatore / gli utenti si assumono la responsabilità delle proprie decisioni durante l'utilizzo di questo prodotto.

6) DIRITTO DEI CONSUMATORI E ACCORDO DI ARBITRATO:

- a) Questo accordo arbitrale ("Accordo") incide sui vostri diritti e rimedi legali prevedendo che le controversie tra l'utente e la fabbricazione di questo prodotto ("Stander"), debbano essere risolte mediante arbitrato vincolante, piuttosto che in un tribunale. Si prega di leggere attentamente questo accordo quando si accettano i termini del presente accordo assemblando e utilizzando questo prodotto. Se non si accettano i termini del presente accordo, restituire il prodotto nella posizione di acquisto per un rimborso.
- i) **RISOLUZIONE DI RECLAMI O CONTROVERSIE.** Qualsiasi reclamo o controversia tra l'utente e Stander derivante o relativo in qualsiasi modo al Prodotto o al presente Accordo sarà risolto mediante arbitrato definitivo e vincolante. Questo obbligo di arbitrato si applica a prescindere dal fatto che il reclamo o la controversia comporti un illecito, frode, falsa dichiarazione, responsabilità del prodotto, violazione, violazione di uno statuto o qualsiasi altra teoria legale. Sia tu che Stander riconoscete e concordate espressamente di rinunciare al vostro diritto di intentare un'azione legale basata su tali rivendicazioni o controversie e di far risolvere tale causa da un giudice o una giuria.
- ii) **LIMITAZIONI DEI RIMEDI GIURIDICI.** Tutti gli arbitrati ai sensi del presente Accordo devono essere condotti solo su base individuale (e non a livello di classe) e un arbitro non ha l'autorità di concedere un sgravio a livello di classe. Riconosci e accetti che questo Accordo ti proibisce espressamente di avviare procedimenti arbitrari come rappresentante di altri o di partecipare a procedimenti arbitrari avviati da qualsiasi altra persona.
- iii) **PROCEDURE DI ARBITRATO.**
- (1) Prima di avviare qualsiasi procedimento arbitrale ai sensi del presente Accordo, è necessario presentare il reclamo / controversia a Stander chiamando il numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453, fornendo le informazioni di contatto richieste e consentendo a Stander l'opportunità di risolverlo. Se il reclamo o la controversia non vengono risolti entro sessanta (60) giorni, è possibile avviare un procedimento arbitrale in conformità con i termini del presente Accordo.
 - (2) L'arbitrato dei reclami / controversie ai sensi del presente Accordo sarà conforme alle procedure di risoluzione delle controversie commerciali degli Stati Uniti d'America ("AAA") e alle procedure supplementari per le controversie relative ai consumatori (vedere www.adr.org per le loro regole e procedure).
 - (3) L'arbitrato di qualsiasi reclamo / controversia ai sensi del presente Accordo sarà nello Stato dello Utah.
 - (4) Tutte le spese amministrative relative ai procedimenti arbitrari ai sensi del presente Accordo saranno suddivise equamente tra l'utente e la Società, tranne che: (a) se i reclami / controversie oggetto del procedimento arbitrale sono inferiori a diecimila dollari (10.000 USD), sarai responsabile per non più di centoventicinque dollari (US \$ 125) in spese amministrative; (b) se il reclamo / controversia soggetto al procedimento arbitrale è superiore a diecimila dollari (10.000 USD) ma inferiore a settantacinquemila dollari (75.000 USD), l'utente sarà responsabile per non più di trecentosettanta-cinque dollari (US \$ 375) in spese amministrative; e (c) se il reclamo / controversia oggetto del procedimento arbitrale è superiore a settantacinquemila dollari (US \$ 75.000), l'utente sarà responsabile per le spese amministrative in conformità con la Tabella delle commissioni commerciali fornita dall'AAA. Riconosci e accetti che ciascuna parte dovrà pagare le tasse e i costi dei propri consulenti, esperti e testimoni.
- iv) **SCELTA DI DIRITTO E SIVIBILITÀ.** Il presente Accordo sarà regolato dalla Federal Arbitration Act degli Stati Uniti e dalle leggi dello stato dello Utah. Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto viene dichiarata o dichiarata illegale, inapplicabile o nulla, tale disposizione sarà inefficace solo nella misura in cui venga giudicata illegale, inapplicabile o nulla e il resto rimarrà pienamente esecutivo.

⚠ AVVERTIMENTO

PERICOLO DI CADUTA E INCISIONE

Le lacune all'interno e intorno a questo prodotto possono intrappolare e uccidere. Le persone con malattia di Alzheimer o demenza, o coloro che sono sedati, confusi o fragili, sono ad aumentato rischio di intrappolamento. Le persone che tentano di scavalcare questo prodotto hanno un aumentato rischio di lesioni o morte a causa di cadute. Assicurarsi sempre che questo prodotto sia correttamente fissato al letto. Se il prodotto può allontanarsi dal letto o dal materasso, può causare intrappolamento e morte.

⚠ AVVERTIMENTO

PERICOLO DI SUFFOCAZIONE E STRANGOLAMENTO

Le lacune all'interno e intorno a questo prodotto possono intrappolare un'uccisione. Le persone con malattia di Alzheimer o demenza, o coloro che sono sedati, confusi o fragili, sono ad aumentato rischio di intrappolamento.

- Non usare MAI a meno che il prodotto non sia stretto contro il materasso, senza spazi vuoti e almeno 12 ½ " dalla testiera e dalla pediera.
- Non usare MAI con i bambini.
- Non utilizzare MAI su lettini per bambini, cuccette, acqua o gonfiabili



Istruzioni di montaggio e installazione:

1. Rimuovere tutti i componenti dalla confezione e verificare che tutti i componenti siano inclusi come mostrato nella Figura 1.

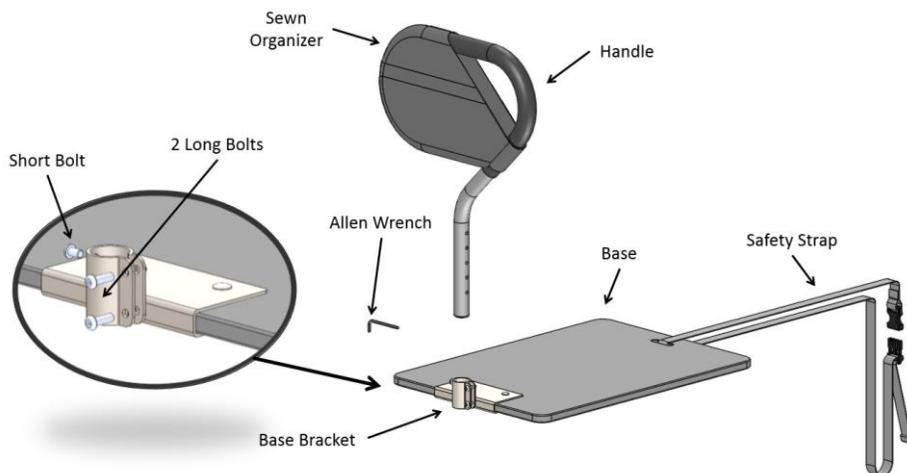


FIGURA 1

2. Determinare da quale parte del computer installare il prodotto Bedcane .

Posizionare la base tra il materasso e la molle del letto. Orientare il " lato aperto della maniglia " verso il piede del letto, come mostrato nella Figura 2.

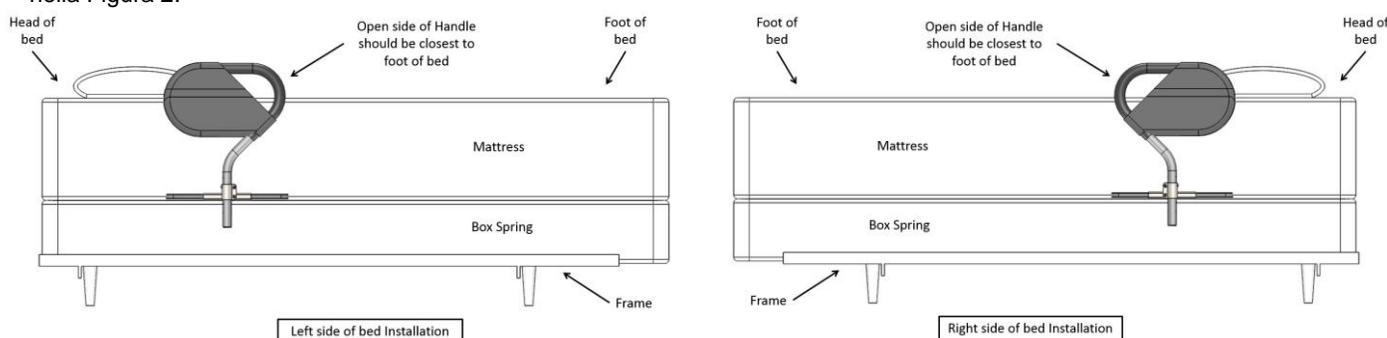


FIGURA 2

3. La "parte superiore della maniglia " deve essere installata in una posizione di 4 pollici sopra la parte superiore del materasso, come mostrato nella Figura 3.

IMPORTANTE : se la parte superiore dell'impugnatura è installata a un'altezza superiore a 4 pollici o inferiore a 4 pollici, esiste il rischio di intrappolamento. L'intrappolamento è una condizione in cui l'utente di Bedcane può rimanere intrappolato tra Bedcane e il letto e provocare lesioni e / o morte. Inoltre, " mai " rimuovi Sewn Organizer dalla maniglia . L'Organizzatore Sewn aiuta anche a prevenire l'intrappolamento.

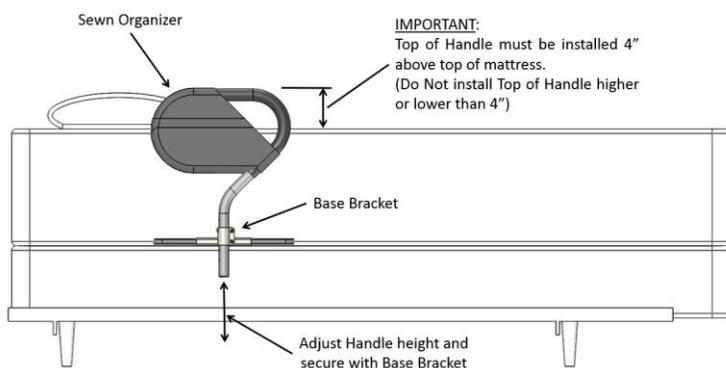


FIGURA 3

4. Inserire la maniglia nella staffa di base e serrare il bullone corto nell'apposito foro di regolazione dell'altezza della maniglia con la chiave a brugola inclusa. Vedi figura 4.

5. Stringere i due bulloni lunghi per rimuovere eventuali oscillazioni tra l' impugnatura e la staffa di base, come mostrato nella Figura 4.


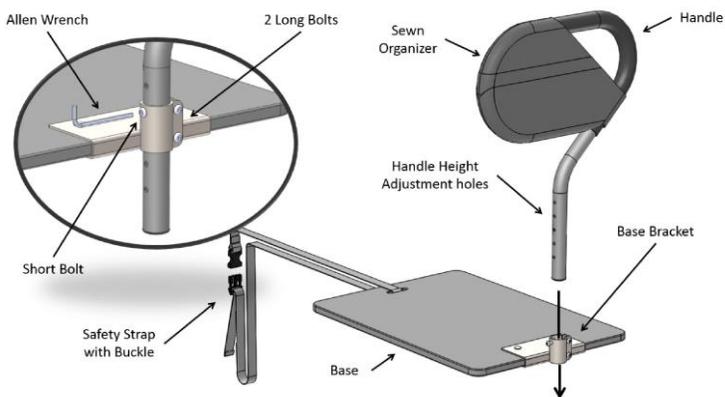


FIGURE 4

6. Separate Buckle and loop strap around Bed Frame and re-buckle as shown in FIGURE 5.

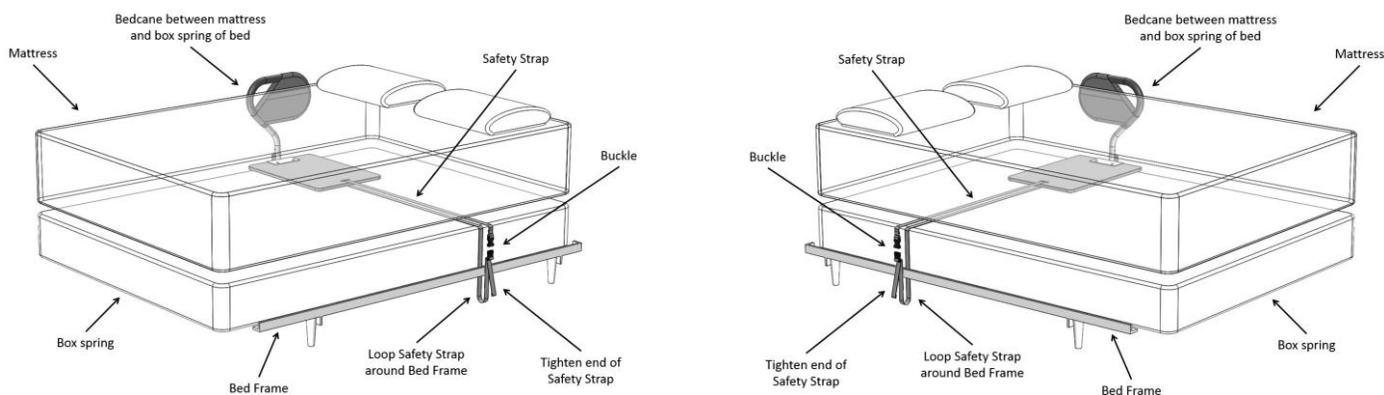

LATO SINISTRO DELL'INSTALLAZIONE LETTO

LATO DESTRO DELL'INSTALLAZIONE LETTO

FIGURA 5

7. **IMPORTANTE:** far scivolare il prodotto Bedrail contro il lato del materasso. Non deve esistere spazio tra la maniglia e il lato del materasso, come mostrato nella FIGURA 6.

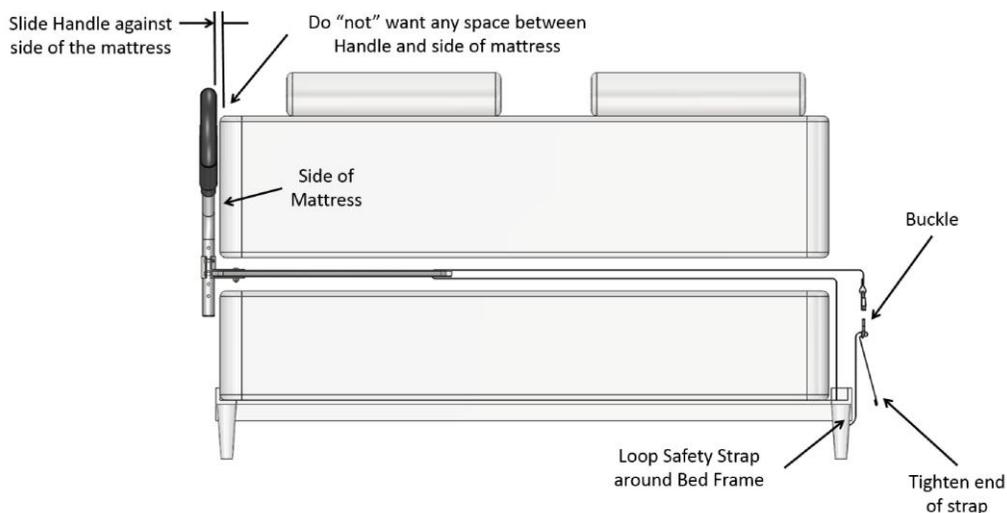


FIGURA 6

8. Agganciare la cinghia di sicurezza attorno al telaio del letto e la cinghia della fibbia insieme. Stringere l'estremità della cinghia di sicurezza per fissare il prodotto della sponda contro il lato del materasso, come mostrato nella FIGURA 7.

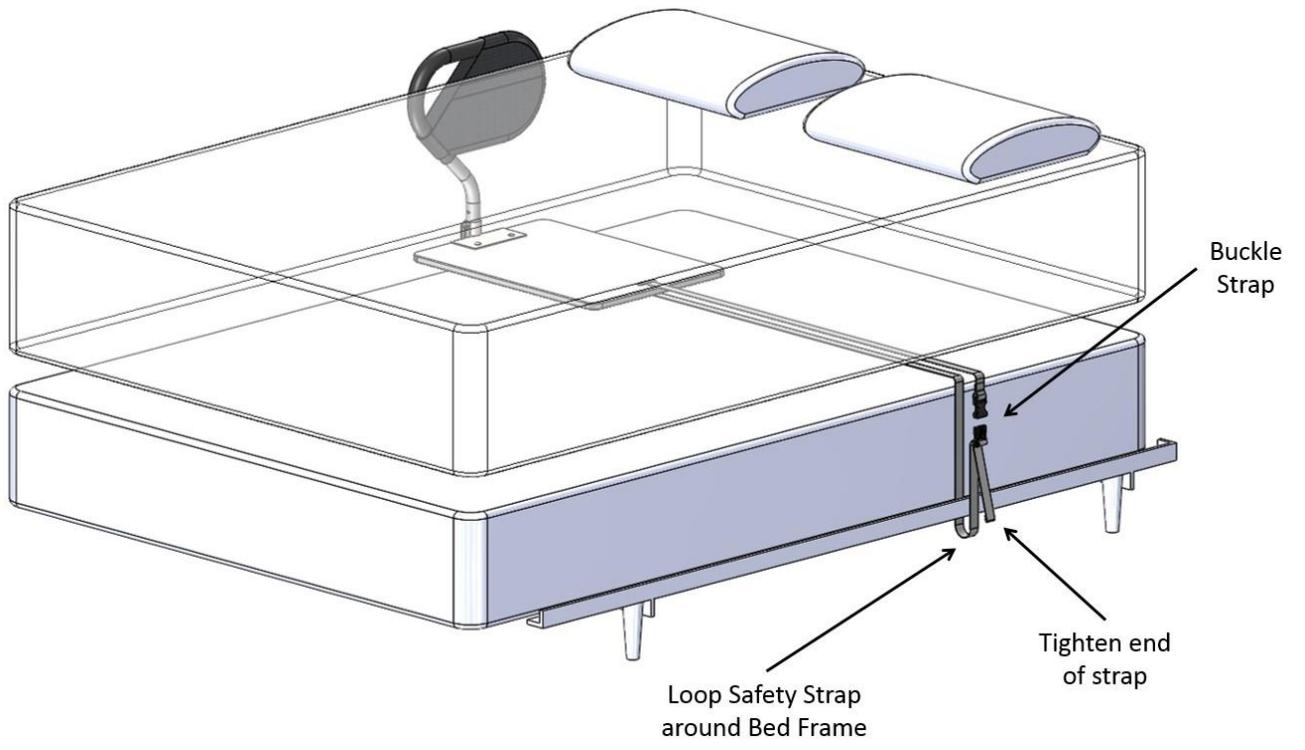


FIGURA 7