

## **ATENCIÓN**

**Existe un riesgo potencial de lesiones graves o la muerte asociadas con prácticamente todos los productos, independientemente de su tipo o uso previsto. Stander, Inc., ha trabajado incansablemente para minimizar todos los riesgos asociados con sus ayudas de movilidad, sin embargo, dados los tipos de productos, usuarios y una miríada de cosas fuera de nuestro control, no podemos eliminar todos los riesgos imaginables. En consecuencia, un consumidor debe usar el sentido común al utilizar nuestros productos y tener en cuenta la salud física y mental general del usuario.**

**Lea todos los materiales que acompañan a este producto antes de instalarlo o utilizarlo.**

## **GARANTÍA LIMITADA**

Stander, Inc. garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de material y / o mano de obra durante 1 año a partir de la fecha de compra. Durante el período de garantía, corregiremos cualquier defecto de material o mano de obra sin cargo. Todos los gastos de envío deben ser pagados por el comprador original. Cualquier pieza de repuesto será nueva y estará garantizada por el resto de la garantía original o treinta (30) días a partir de la fecha de envío, la que sea más larga. El comprador original debe notificar a Stander, Inc. durante el período de garantía por escrito sobre el defecto en la mano de obra o el material. Esta garantía no es transferible y cubre solo el uso normal. Stander no reembolsará ni pagará los gastos de envío. La garantía NO cubre: (1) Daño durante el envío que no sea el envío original al minorista; (2) Daño causado por archivos adjuntos no autorizados, alteraciones o modificaciones; (3) Daño causado por el uso del producto para fines distintos de aquellos para los cuales el producto fue diseñado o destinado; y (4) Daño causado por cualquier otro abuso, mal uso, mal manejo o aplicación incorrecta.

Bajo ninguna circunstancia Stander, Inc. será responsable de ningún daño especial, incidental o consecuente basado en el incumplimiento de esta garantía limitada, incumplimiento de contrato o responsabilidad estricta.

**NO HAY GARANTÍAS QUE SE EXTENDAN MÁS ALLÁ DE LAS INDICADAS AQUÍ. TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS (INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR), SE RECHAZAN AQUÍ.**

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado. Para obtener servicio bajo esta garantía, puede comunicarse con Stander, Inc. al (800) 506-9901 o al (435) 755-0453.

## **Advertencias**

### **1) INSTALACIÓN:**

- a) No use ni instale este producto a menos que lea y comprenda estas advertencias e instrucciones de ensamblaje para asegurarse de que el producto esté instalado y utilizado correctamente. Si el instalador / usuario (s) está instalando este producto en un hogar de ancianos, un centro de vida asistida o una instalación similar, siga estas y las políticas de instalación de las instalaciones. Si tiene alguna pregunta sobre la instalación, el uso, los riesgos asociados o cualquier cosa relacionada con este producto, llame a Stander Inc. al (800) 506-9901 o al (435) 755-0453.
- b) La instalación incorrecta de este producto aumenta significativamente el riesgo de caídas. Este producto de poste se fija entre el piso y el techo. Debido a que existen muchos tipos diferentes de condiciones de piso y techo, depende del instalador y / o usuario de este producto determinar si el producto puede instalarse de manera segura.
- c) **IMPORTANTE:** El poste puede aflojarse (no está asegurado adecuadamente entre el piso y el techo) como resultado de la miríada de condiciones. Es responsabilidad del instalador y / o usuarios verificar y asegurar periódicamente el poste entre el piso y el techo con la llave incluida. **NO** deseche la llave incluida.
- d) **NO** instale el producto en techos angulados, techos suspendidos o cualquier otro tipo de techo que no permita que el producto se asegure correctamente entre el piso y el techo. El poste debe instalarse perpendicular al piso y al techo. Todas las almohadillas protectoras de goma deben enganchar el techo y el piso con una fuerza igualmente distribuida.
- e) **NO** instale productos de poste en alturas de techo de menos de 7 pies o mayores de 10 pies.
- f) **NO** instale el producto de poste en una plataforma o cualquier otra superficie que se levante del piso. Si tiene preguntas, es responsabilidad del instalador / usuario (s) llamar a Stander Inc. al (800) 506-9901 o (435) 755-0453. **NO** instale este producto si no está seguro de que el producto se puede asegurar correctamente.
- g) Las condiciones del piso también afectan la capacidad de instalar el producto de forma segura. **NO** instale el producto sobre alfombras u otros objetos móviles. **NO** instale el producto en condiciones de piso que permitan que la base del poste se deslice o resbale. Si la base del producto se mueve después de la instalación, el producto no es seguro de usar.
- h) Este producto no está destinado a colocarse dentro de una bañera o dentro de una ducha.
- i) El poste de seguridad utiliza un pasador con resorte que permite que el mango gire y se bloquee en varias posiciones del usuario. Asegúrese de que el mango giratorio esté en una posición bloqueada antes de usar el producto. Si el mango giratorio no está bloqueado antes de usarlo, el usuario puede caerse y provocar lesiones o daños graves.
- j) **IMPORTANTE:** Si instala el producto de poste junto a una cama, sofá, inodoro o cualquier otro objeto, Stander Inc. recomienda **NO** instalar el producto más cerca de la capacidad del usuario para caminar alrededor del poste de manera segura o puede existir la posibilidad de quedar atrapado entre el poste y el costado de cualquier objeto adyacente al poste. El atrapamiento es una condición en la que un individuo puede alojarse entre objetos. El mango giratorio debe tenerse en cuenta al colocar el poste al lado de un objeto adyacente. En otras palabras, el mango puede girar 360 grados. Los usuarios deben poder caminar con seguridad alrededor del poste en cada posición de la manija giratoria. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que no haya forma posible de quedar atrapado entre el poste y / o el mango giratorio y el lado de cualquier objeto adyacente al poste. Dado que hay una gran cantidad de condiciones de usuario, el instalador / usuario (s) debe determinar si el poste debe instalarse más lejos del lado de una cama. Si tiene preguntas, es responsabilidad del instalador / usuario (s) llamar a Stander Inc. al (800) 506-9901 o (435) 755-0453.

### **2) CONDICIONES FÍSICAS Y MENTALES:**

- a) Personas que tienen problemas con limitaciones físicas, parálisis, síntomas de demencia, Alzheimer o pérdida de memoria, sueño, incontinencia, dolor, movimientos corporales incontrolados, levantarse de la cama y caminar sin seguridad sin ayuda, fragilidad, debilidad, confusión, inquietud, terminal. la inquietud, o están bajo la influencia de medicamentos, drogas o cualquier sustancia que pueda perjudicar su equilibrio o juicio, o cualquier otra razón imprevisible que pueda afectar la capacidad física y mental de los usuarios para usar este producto de manera segura, tienen un mayor riesgo de atrapamiento. Dado que estas condiciones son

subjetivas y Stander Inc. no tiene control sobre quién elige usar este producto, es responsabilidad del instalador / usuario consultar a un médico antes de usar este producto.

## Poste de seguridad 1100 con barra de agarre curva V 1.0

b) Este producto no está diseñado para transportar todo el peso de una persona. Este producto solo está destinado a proporcionar equilibrio y apoyo mientras está sentado y de pie.

### 3) FACTORES EXTERNOS:

- a) No se debe permitir que los niños se cuelguen o jueguen con este producto.
- b) Debido a factores externos imprevisibles, el producto puede soltarse. Si este es el caso, aumente la tensión entre el piso y el techo con la llave incluida. NO deseche la llave incluida.
- c) Las condiciones del piso pueden afectar la estabilidad del poste, como irregularidades del piso, superficies mojadas u otras condiciones que permitirían que la base del producto se mueva. NO use el producto en superficies de piso que permitan que la base del producto se mueva.
- d) Si se retira y reinstala el producto, el poste debe reinstalarse correctamente como se indica en estas instrucciones. Guarde las instrucciones para referencia futura.

### 4) ACUERDO ENTRE EL INSTALADOR / USUARIO (S) Y STANDER INC .:

- a) Si el instalador / usuario (s) elige usar este producto, se entiende entre el instalador / usuario (s) Y Stander Inc., que el instalador / usuario (s) acepta los riesgos asociados con el uso de este producto. Dado que estas condiciones son subjetivas y Stander Inc. no tiene control sobre quién elige usar este producto, el instalador / usuario (s) acepta ser responsable de sus decisiones al usar este producto.

### 5) DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y ACUERDO DE ARBITRAJE:

- a) Este acuerdo de arbitraje ("Acuerdo") afecta sus derechos y recursos legales al proporcionar que las disputas entre usted y la fabricación de este producto ("Stander") deben resolverse mediante un arbitraje vinculante, en lugar de en un tribunal. Lea este acuerdo detenidamente a medida que acepta los términos de este acuerdo al ensamblar y usar este producto. Si no está de acuerdo con los términos de este acuerdo, devuelva el producto a la ubicación de compra para obtener un reembolso.
- i) RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES O DISPUTAS. Cualquier reclamo o disputa entre usted y Stander que surja o se relacione de alguna manera con el Producto o este Acuerdo se resolverá mediante un arbitraje vinculante final. Esta obligación de arbitraje se aplica independientemente de si el reclamo o disputa involucra un agravio, fraude, tergiversación, responsabilidad del producto, negligencia, violación de un estatuto o cualquier otra teoría legal. Tanto usted como Stander reconocen y aceptan específicamente que renuncia a su derecho a presentar una demanda basada en tales reclamos o disputas y que un juez o jurado resuelva dicha demanda.
- ii) LIMITACIÓN DE RECURSOS LEGALES. Todos los arbitrajes bajo este Acuerdo se llevarán a cabo de manera individual (y no a nivel de toda la clase) y un árbitro no tendrá autoridad para otorgar desagravio a toda la clase. Usted reconoce y acepta que este Acuerdo le prohíbe específicamente iniciar procedimientos de arbitraje como representante de otros o unirse a cualquier procedimiento de arbitraje presentado por cualquier otra persona. iii) PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE.
  - (1) Antes de comenzar cualquier procedimiento de arbitraje bajo este Acuerdo, primero debe presentar el reclamo / disputa a Stander llamando al (800) 506-9901 o (435) 755-0453, proporcionando la información de contacto solicitada y permitiendo a Stander la oportunidad de resolverlo. Si su reclamo o disputa no se resuelve dentro de los sesenta (60) días, puede iniciar un procedimiento de arbitraje de acuerdo con los términos de este Acuerdo.
  - (2) El arbitraje de reclamo (s) / disputa (s) bajo este Acuerdo se realizará de conformidad con la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA") Procedimientos de resolución de disputas comerciales de los Estados Unidos y procedimientos complementarios para disputas relacionadas con el consumidor (consulte [www.adr.org](http://www.adr.org) para conocer sus reglas y procedimientos).
  - (3) El arbitraje de cualquier reclamo / disputa bajo este Acuerdo se realizará en el Estado de Utah.
  - (4) Todos los gastos administrativos de los procedimientos de arbitraje bajo este Acuerdo se dividirán en partes iguales entre usted y la Compañía, excepto que: (a) si las reclamaciones / disputas sujetas a los procedimientos de arbitraje son inferiores a diez mil dólares (US \$ 10,000), usted será responsable de no más de ciento veinticinco dólares (US \$ 125) en gastos administrativos; (b) si el reclamo / disputa sujeto a los procedimientos de arbitraje es más de diez mil dólares (US \$ 10,000) pero menos de setenta y cinco mil dólares (US \$ 75,000), entonces usted será responsable de no más de trescientos setenta y cinco dólares (US \$ 375) en gastos administrativos; y (c) si el reclamo / disputa sujeto a los procedimientos de arbitraje es superior a setenta y cinco mil dólares (US \$ 75,000), entonces usted será responsable de los gastos administrativos de acuerdo con el Anexo de tarifas comerciales proporcionado por la AAA. Usted reconoce y acepta que cada parte pagará los honorarios y costos de sus propios abogados, expertos y testigos.
- iv) ELECCIÓN DE LEY Y SEPARABILIDAD. Este Acuerdo se registrará por la Ley Federal de Arbitraje de los Estados Unidos y las leyes del estado de Utah. Si alguna disposición de este Acuerdo se declara o se considera ilegal, inaplicable o nula, dicha disposición será ineficaz solo en la medida en que se considere ilegal, inaplicable o nula y el resto seguirá siendo plenamente aplicable.


### ADVERTENCIA

### PELIGRO DE ENTRADA Y CAÍDA

- NO use ni coloque cerca de camas para adultos, camas para niños, literas, camas de agua o camas inflables. El uso del producto en cualquier cama puede provocar un riesgo de atrapamiento.
- Las personas con enfermedad de Alzheimer o demencia, o las que están sedadas, confundidas o frágiles, tienen un mayor riesgo de atrapamiento y caídas.
- El incumplimiento de estas condiciones podría poner al usuario en riesgo de quedar atrapado o caerse.


## Instrucciones:

1. Retire todos los componentes de la caja y verifique que todas las partes estén incluidas como se muestra en la Figura 1.

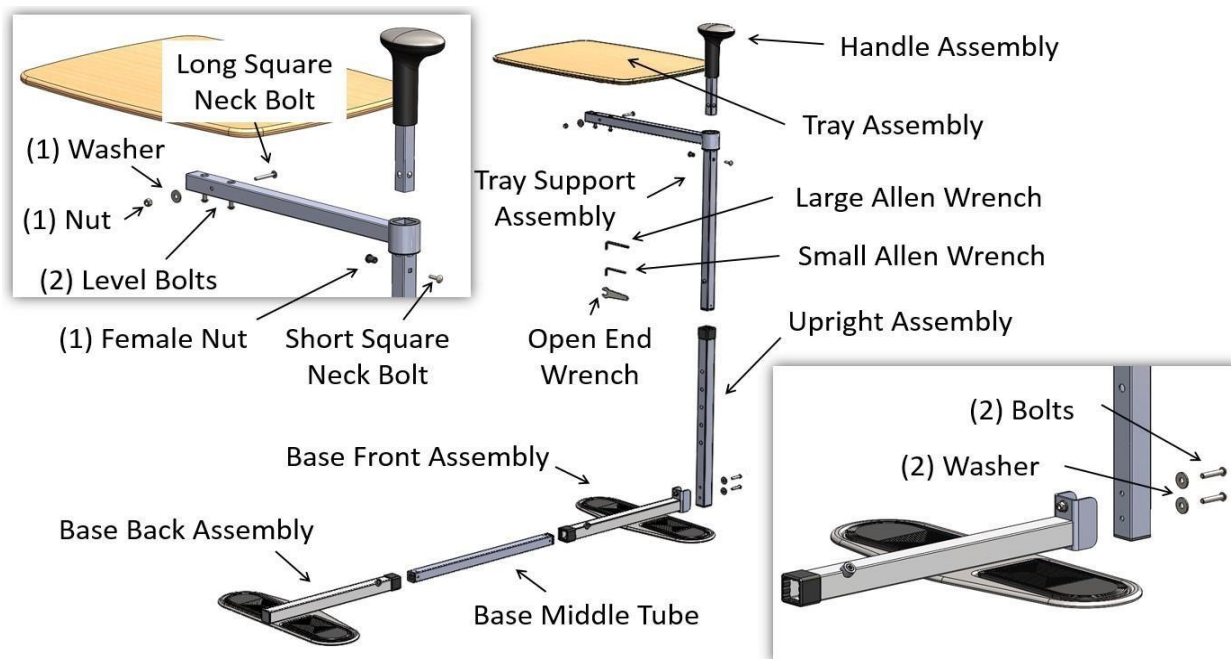

**FIGURA 1**


2. Deslice el conjunto frontal de la base y el conjunto posterior de la base sobre el tubo central de la base como se muestra en la Figura 2.

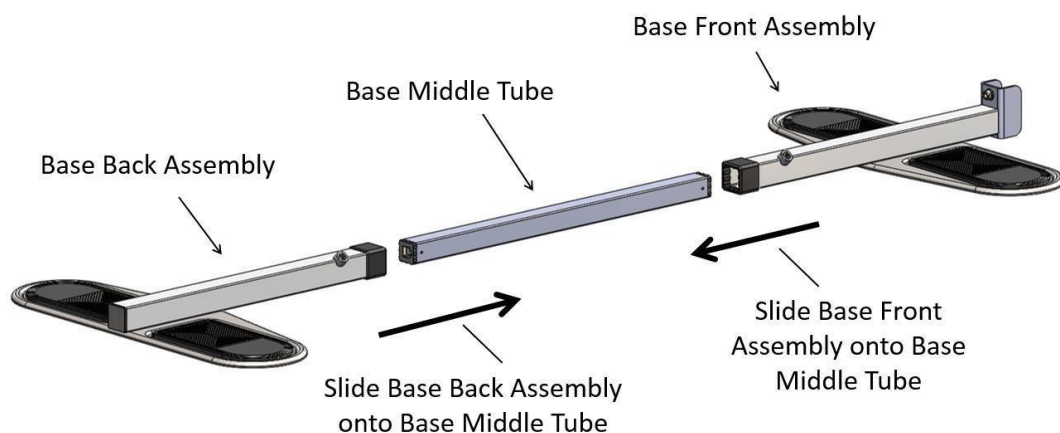

**FIGURA 2**


3. Posición las almohadillas de las patas de goma a la misma distancia de las patas de muebles espaciamiento y apriete los Set Tornillos con la Large Allen llave como se muestra en la Figura 3.

NOTA: La Base Middl correo tubo debe involucrar al conjunto delantero base y la base trasera de la Asamblea aproximadamente 4 pulgadas a cada lado para que los tornillos de fijación para participar adecuadamente.

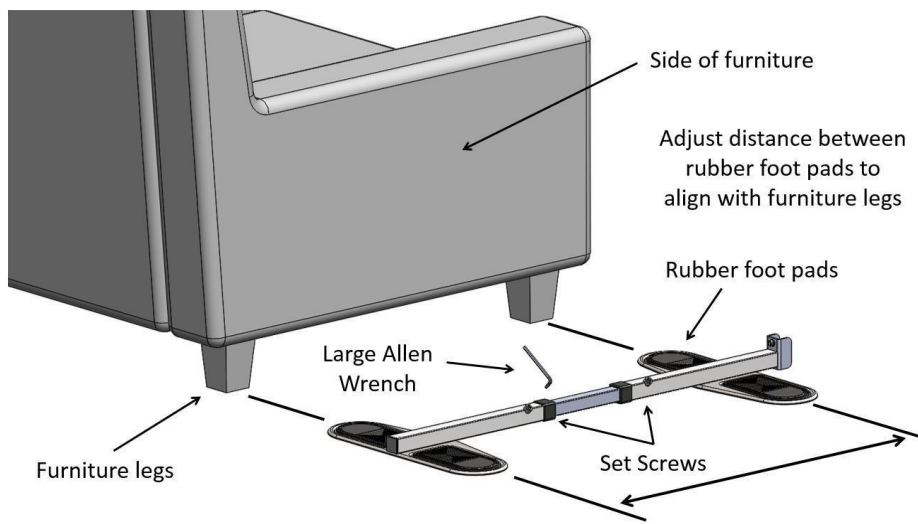


**FIGURA 3**

4. Fije el conjunto vertical al conjunto frontal de la base con la llave Allen pequeña, 2 pernos y 2 arandelas como se muestra en la Figura 4.

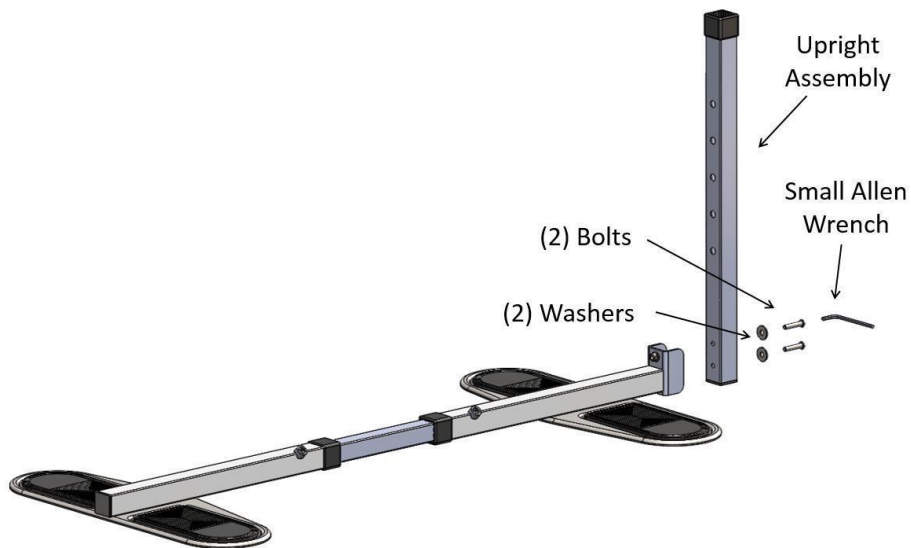


**FIGURA 4**

5. Uso de la llave de extremo abierto, conecte el ensamblaje de la bandeja a la Asamblea soporte de la bandeja con el cuadrado de cuello largo del perno, 1 lavadora y 1 tuerca como se muestra en la Figura 5.

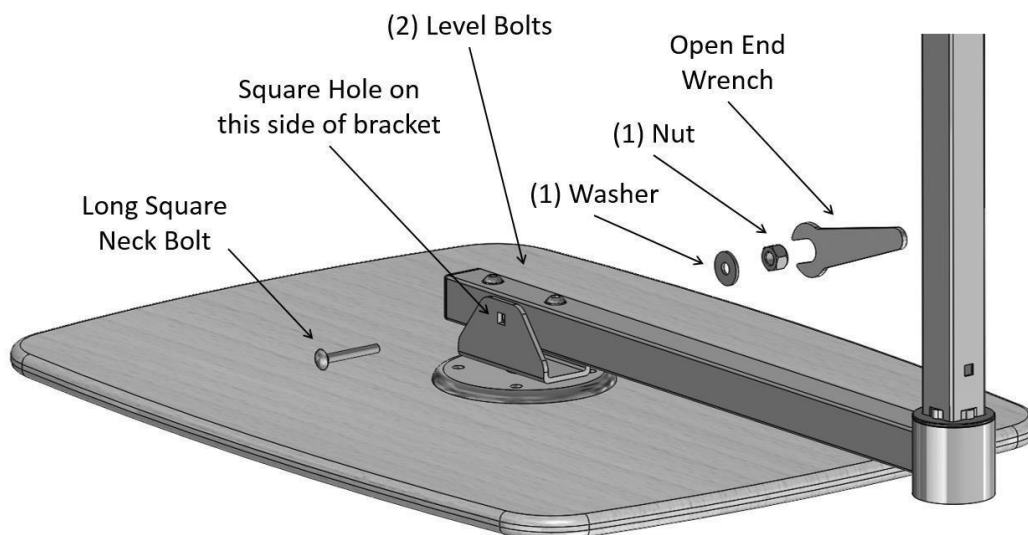


**FIGURA 5**

6. Presione el pasador de resorte en el conjunto de soporte de la bandeja y deslice el conjunto de soporte de la bandeja en el conjunto vertical. Permita que el pasador de resorte se enganche en cualquiera de los agujeros en el conjunto vertical como se muestra en la FIGURA 6.

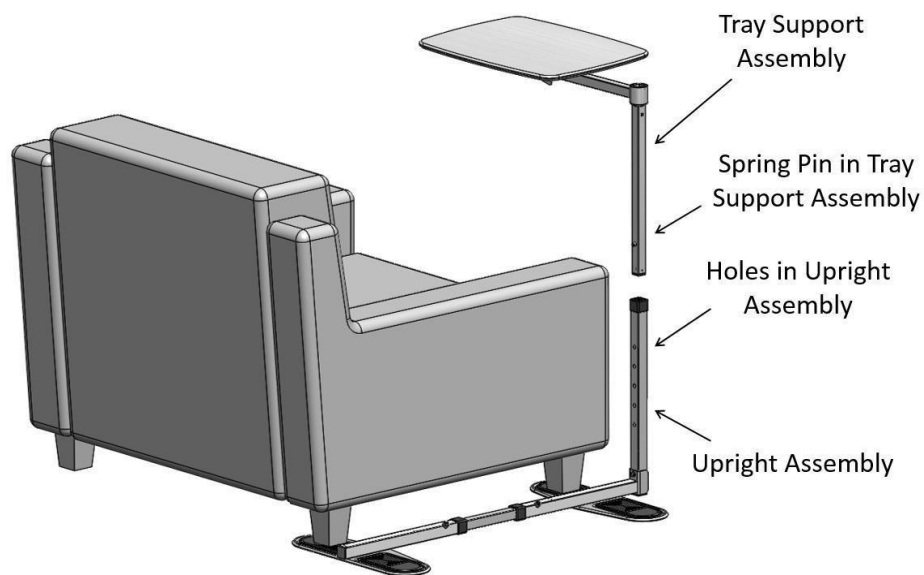


**FIGURA 6**

7. Ajuste la altura del conjunto de soporte de la bandeja para girar sobre el reposabrazos del mueble. **NOTA:** Las patas de los muebles se pueden colocar en cualquiera de los juegos de almohadillas de goma como se muestra en la FIGURA 7 y la FIGURA 8.

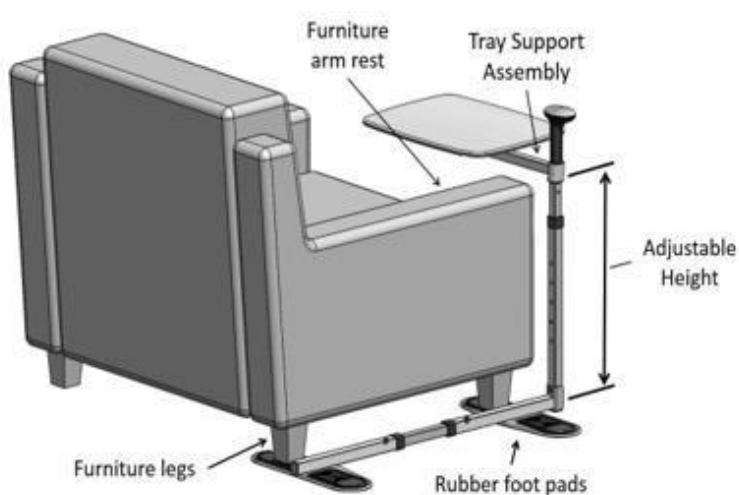


**FIGURA 7**

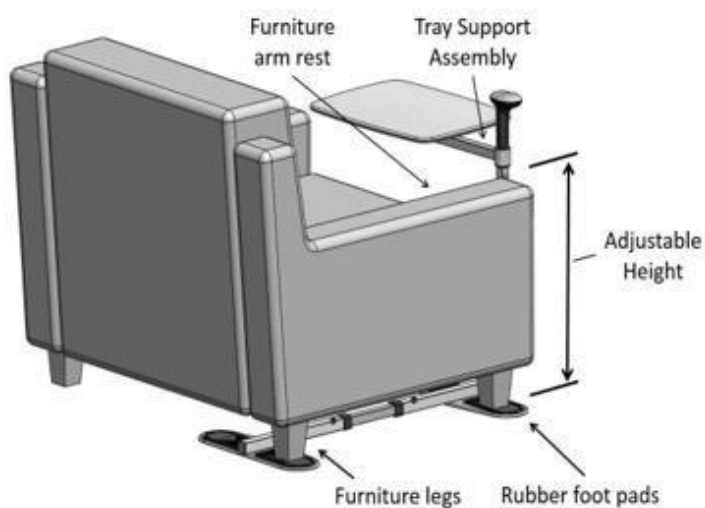


**FIGURA 8**

8. Fije el conjunto de la manija al conjunto de soporte de la bandeja con la llave Allen pequeña, la tuerca hembra, el perno de cuello cuadrado corto como se muestra en la Figura 9. **NOTA:** El perno de cuello cuadrado corto debe insertarse en el orificio cuadrado del conjunto de soporte de la bandeja.

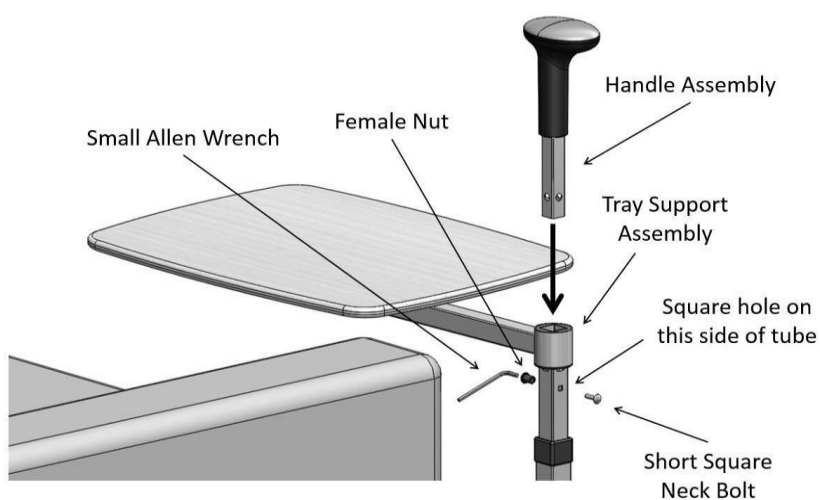

**FIGURA 9**


9. El conjunto de la bandeja se puede nivelar con la llave Allen pequeña. Afloje el tornillo nivelador en el lado alto y luego apriete el tornillo en el lado inferior. Cuando el conjunto de la bandeja esté nivelado, apriete cada tornillo por igual como se muestra en la FIGURA 10.

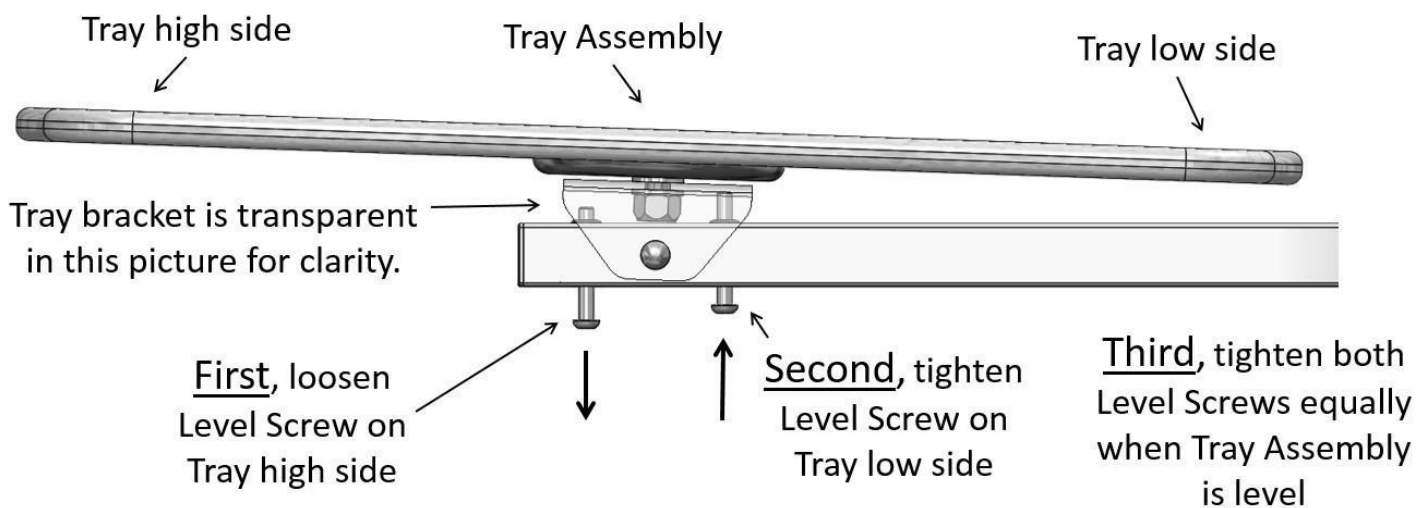

**FIGURA 10**


**ATTENTION:**

IF TRAY BECOMES LOOSE DURING ASSEMBLY OR USE, REFER TO THE FOLLOWING INSTRUCTIONS TO TIGHTEN.

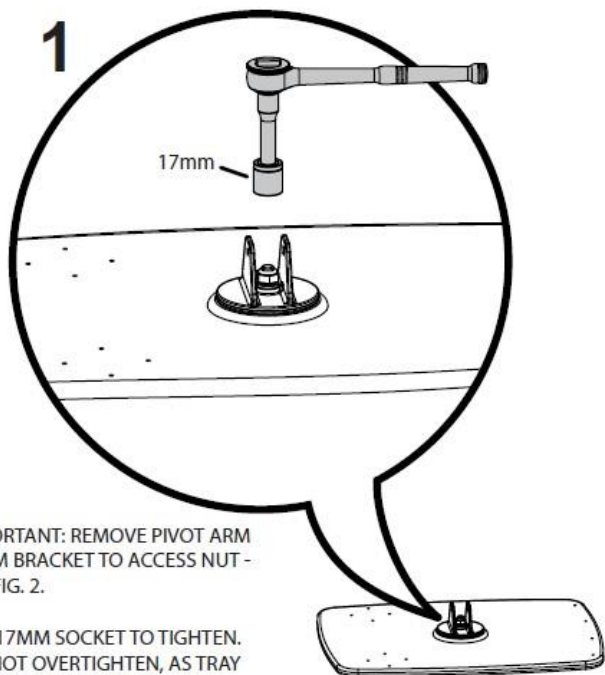

IMPORTANT: REMOVE PIVOT ARM FROM BRACKET TO ACCESS NUT - SEE FIG. 2.

USE 17MM SOCKET TO TIGHTEN. DO NOT OVERTIGHTEN, AS TRAY WILL BE DIFFICULT TO ROTATE.

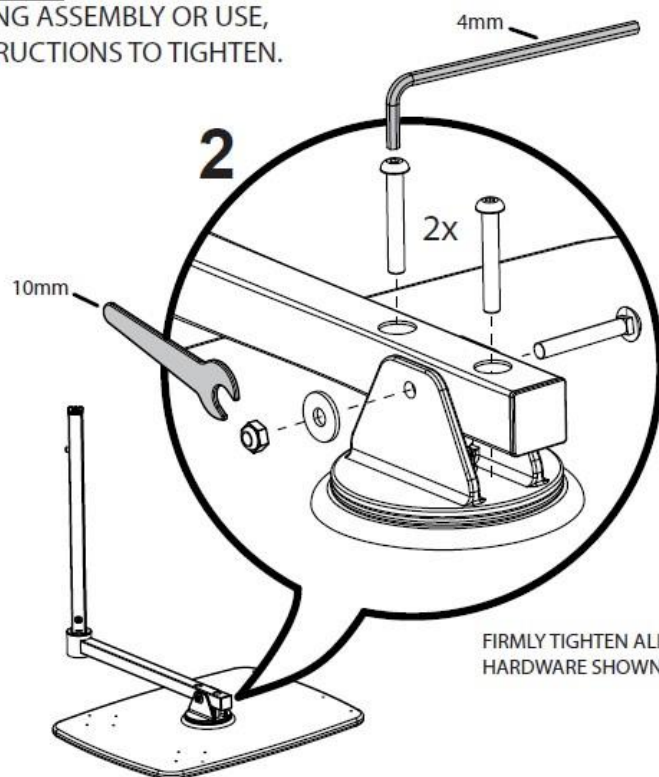

FIRMLY TIGHTEN ALL HARDWARE SHOWN.

For more detailed instructions see video at: <https://stander.com/2600-video> or contact us at 800-506-9901, or email [support@stander.com](mailto:support@stander.com)

