

ATTENZIONE

Esiste un potenziale rischio di lesioni gravi o morte associate praticamente a tutti i prodotti, indipendentemente dal tipo o dall'uso previsto. Stander, Inc., ha lavorato instancabilmente per ridurre al minimo tutti i rischi associati ai suoi ausili per la mobilità, ma dati i tipi di prodotti, utenti e una miriade di cose al di fuori del nostro controllo, non possiamo eliminare ogni rischio immaginabile. Di conseguenza, un consumatore deve usare il buon senso quando utilizza i nostri prodotti e tenere conto della salute fisica e mentale generale dell'utente.

Leggi tutto dei materiali che accompagnano questo prodotto prima che venga installato o utilizzato.

GARANZIA LIMITATA

Stander, Inc. garantisce all'acquirente originale che questo prodotto sarà privo di difetti nei materiali e / o nella lavorazione per 1 anno dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, correggeremo qualsiasi difetto nel materiale o nella lavorazione senza alcun addebito. Tutte le spese di spedizione devono essere a carico dell'acquirente originale. Eventuali parti di ricambio saranno nuove e garantite per il resto della garanzia originale o trenta (30) giorni dalla data di spedizione, a seconda di quale sia la durata più lunga. L'acquirente originale deve notificare Stander, Inc. durante il periodo di garanzia per iscritto del difetto di fabbricazione o materiale. Questa garanzia non è trasferibile e copre solo l'uso normale. Stander non rimborserà né pagherà le spese di spedizione. La garanzia NON copre: (1) Damage durante la spedizione diversa dalla spedizione originale al rivenditore; (2) danni causati da allegati, alterazioni o modifiche non autorizzati; (3) danni causati dall'uso del prodotto per scopi diversi da quelli per i quali il prodotto è stato progettato o curato; e (4) danni causati da qualsiasi altro abuso, uso improprio, cattiva gestione o errata applicazione.

In nessuna circostanza Stander, Inc. potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni speciali, incidentali o consequenziali basati sulla violazione di questa garanzia limitata, violazione dei contratti o responsabilità oggettiva.

NON CI SONO GARANZIE CHE SI ESTENDONO OLTRE QUELLI INDICATI QUI. TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE (COMPRESSE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE), SONO ESCLUSIVE.

Alcune norme non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile. Questa garanzia ti dà un diritto legale specifico e potresti anche avere altri diritti che variano da stato a stato. Per ottenere assistenza ai sensi della presente garanzia, è possibile contattare Stander, Inc. al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453.

AVVERTENZE

1) INSTALLAZIONE:

- a) Non utilizzare o installare questo prodotto a meno che non si leggano e comprendano queste avvertenze e istruzioni di assemblaggio per assicurarsi che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente. Se l'installatore / gli utenti installano questo prodotto in una casa di cura, in un centro di residenza assistita o in una struttura simile, seguire queste e le politiche di installazione di Bed Rail. In caso di domande relative all'installazione, all'utilizzo, alle applicazioni associate o qualsiasi altra cosa relativa a questo prodotto, chiamare Stander Inc. al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453.
- b) Un'installazione errata di questo prodotto aumenta significativamente il rischio di intrappolamento (vedere la sezione ENTRAPMENT più avanti). NON installare il prodotto senza giroletto in nessun caso. NON utilizzare il prodotto senza cinturino di sicurezza. Non installare questo prodotto se non si riesce a seguire esattamente le istruzioni.
- c) Questo prodotto deve essere utilizzato solo con molle innerspring o memory foam da 10 pollici a 16 pollici di spessore. Questo prodotto non deve essere utilizzato su alcun letto costituito da un materiale che può aumentare il potenziale di intercapedine tra la parte superiore del materasso e la parte inferiore della sponda del letto. Esempi di letti che causano problemi di spazio sono, a titolo esemplificativo, letti ad acqua, schiuma leggera, materassi ad aria o di altro tipo, materassi che comprimono più di 1 "sul bordo durante l'uso e letti con telai regolabili.
- d) Prima dell'uso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il lato del letto e il lato del materasso. Una lacuna in quest'area significa che il prodotto è stato installato in modo errato. La cinghia di sicurezza inclusa è progettata per fissare la sponda del letto al lato di un materasso per evitare uno spazio in questa zona.
- e) Il prodotto è dotato di un cucito Organiz er e una cinghia di sicurezza che è destinato a ridurre il rischio di intrappolamento (vedi paragrafo ENTRAPMENT sotto). Non rimuovere MAI l' organizzatore e la cinghia di sicurezza cuciti o utilizzare il prodotto senza questi articoli. La rimozione, la modifica o l'alterazione dell'organizzatore cucito e / o della cinghia di sicurezza aumenta significativamente il rischio di intrappolamento.

2) ENTRAPMENT:

- a) Esiste il rischio di intrappolamento associato alle sponde del letto e ad altri dispositivi simili per la mobilità sul lato del letto. L'intrappolamento si verifica quando un individuo viene incuneato tra una sponda del letto e qualsiasi altro oggetto. L'intrappolamento ha provocato lesioni gravi e morte. Leggere le **Linee guida per la prevenzione degli intrappolamenti** allegate prima dell'installazione o dell'uso di questo prodotto. Copie aggiuntive delle Linee guida per la prevenzione degli intrappolamenti possono essere ottenute da www.stander.com o contattando un rappresentante Stander al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453.

3) CONDIZIONI FISICHE E MENTALI:

- a) Individui che hanno problemi con limitazioni fisiche, paralisi, sintomi di demenza, Alzheimer o perdita di memoria, sonno, incontinenza, pa in, movimento incontrollato del corpo, alzarsi dal letto e camminare senza sicurezza senza assistenza, fragilità, debolezza, confusione, irrequietezza, irrequietezza terminale, o sono sotto l'influenza di farmaci, droghe o altre sostanze che potrebbero comprometterne l'equilibrio o il giudizio, o qualsiasi altra ragione imprevedibile che potrebbe influenzare la capacità fisica e mentale degli utenti di usare questo prodotto in sicurezza, sono a maggior rischio di intrappolamento. Poiché queste condizioni sono soggettive e Stander Inc. non ha alcun controllo su chi sceglie di utilizzare questo prodotto, è responsabilità dell'installatore / utente / i consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto.
- b) Questo prodotto non è destinato a sostenere l'intero peso di un individuo. Questo prodotto ha lo scopo di fornire equilibrio e supporto solo in piedi e in piedi.

4) FATTORI ESTERNI:

5000 Bed Rail Advantage V 1.0

- a) Ai bambini non dovrebbe essere permesso di aggrapparsi o giocare con questo prodotto.
- b) Il cambio della biancheria da letto (copriletto, coperte, lenzuola, ecc.) può richiedere una nuova regolazione della cinghia di sicurezza per eliminare uno spazio tra la sponda del letto e il lato del materasso.
- c) Se il prodotto viene rimosso e reinstallato, la cinghia di sicurezza deve essere reinstallata correttamente come indicato nelle presenti istruzioni.

5) ACCORDO TRA INSTALLATORE / UTENTE / I E STANDER INC. :

- a) Se l'installatore / gli utenti scelgono di usare questo prodotto, si intende tra l'installatore / gli utenti E Stander Inc. che l'installatore / gli utenti accettano i rischi associati all'uso di questo prodotto. Sin ce queste condizioni sono soggettivi e Stander Inc. non ha alcun controllo su chi sceglie di usare questo prodotto, il programma di installazione / utente (s) accetta di essere responsabile per le loro decisioni quando si utilizza questo prodotto.

6) DIRITTO DEI CONSUMATORI E ACCORDO DI ARBITRATO:

- a) Il presente accordo di arbitrato ("Accordo") incide sui diritti e sui rimedi legali dell'utente prevedendo che le controversie tra l'utente e la fabbricazione di questo prodotto ("Stander") debbano essere risolte mediante arbitrato vincolante, anziché in un tribunale. Si prega di leggere attentamente questo accordo quando si accettano i termini del presente accordo assemblando e utilizzando questo prodotto. Se non si accettano i termini del presente accordo, restituire il prodotto nella posizione di acquisto per un rimborso.

i) **RISOLUZIONE DI RECLAMI O CONTROVERSIE.** Eventuali reclami o controversie tra l'utente e Stander derivanti o relativi in qualsiasi modo al Prodotto o al presente Accordo devono essere risolti mediante arbitrato definitivo e vincolante. Questo obbligo di arbitrato si applica indipendentemente dal fatto che il reclamo o la controversia comporti un illecito, frode, dichiarazione falsa, responsabilità del prodotto, negligenza, violazione di uno statuto o qualsiasi altra teoria legale. Sia tu che Stander riconoscete e concordate espressamente di rinunciare al vostro diritto di intentare un'azione legale basata su tali rivendicazioni o controversie e di far risolvere tale causa da un giudice o da una giuria.

ii) **LIMITAZIONE DEI RIMEDI GIURIDICI.** Tutti gli arbitrati ai sensi del presente Accordo devono essere condotti solo su base individuale (e non a livello di classe) e un arbitro non ha l'autorità di concedere un sgravio a livello di classe. Riconosci e accetti che questo Accordo ti proibisce specificamente di avviare procedimenti arbitrali come rappresentante di altri o di partecipare a procedimenti arbitrali avviati da qualsiasi altra persona.

iii) **PROCEDURE DI ARBITRATO.**

(1) Prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale ai sensi del presente Accordo, è necessario presentare il reclamo / controversia a Stander chiamando il numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453, fornendo le informazioni di contatto richieste e consentendo a Stander l'opportunità di risolvere esso. Se il reclamo o la controversia non vengono risolti entro sessanta (60) giorni, è possibile avviare procedimenti arbitrali in conformità con i termini del presente Accordo.

(2) L'arbitrato dei reclami / controversie ai sensi del presente Accordo sarà conforme alle procedure di risoluzione delle controversie commerciali degli Stati Uniti d'America ("AAA") e alle procedure supplementari per le controversie relative ai consumatori (vedere www.adr.org per le loro regole e procedure).

(3) L'arbitrato di qualsiasi reclamo / controversia ai sensi del presente Accordo sarà nello Stato dello Utah.

(4) Tutte le spese amministrative relative alle procedure arbitrali ai sensi del presente Accordo saranno suddivise equamente tra l'utente e la Società, tranne che: (a) se i reclami / controversie oggetto della procedura arbitrale sono inferiori a diecimila dollari (10.000 USD), sarai responsabile per non più di centoventicinque dollari (US \$ 125) in spese amministrative; (b) se il reclamo / controversia oggetto del procedimento arbitrale è superiore a diecimila dollari (10.000 USD) ma inferiore a settantacinquemila dollari (75,00 USD 0), l'utente sarà responsabile per non più di trecento settantacinque dollari (US \$ 375) in spese amministrative; e (c) se il reclamo / controversia oggetto del procedimento arbitrale è superiore a settantacinquemila dollari (US \$ 75.000), l'utente sarà responsabile per le spese amministrative in conformità con la Tabella delle commissioni commerciali fornita dall'AAA. Riconosci e accetti che ciascuna parte dovrà pagare le tasse e i costi dei propri consulenti, esperti e testimoni.

iv) **SCELTA DI DIRITTO E SEVERABILIT Y.** Il presente Accordo sarà regolato dalla Federal Arbitration Act degli Stati Uniti e dalle leggi dello stato dello Utah. Se una qualsiasi disposizione del presente Accordo viene dichiarata o ritenuta illegale, inapplicabile o nulla, tale disposizione sarà inefficace solo nella misura in cui venga trovata illegale, inapplicabile o nulla e il resto rimarrà pienamente esecutivo.

 **AVVERTIMENTO**

PERICOLO DI CADUTA E INCISIONE

Le lacune all'interno e intorno a questo prodotto possono intrappolare e uccidere. Le persone con malattia di Alzheimer o demenza, o coloro che sono sedati, confusi o fragili, sono ad aumentato rischio di intrappolamento. Le persone che tentano di scavalcare questo prodotto hanno un aumentato rischio di lesioni o morte a causa di cadute. Assicurarsi sempre che questo prodotto sia correttamente fissato al letto. Se il prodotto può allontanarsi dal letto o dal materasso, può causare intrappolamento e morte.

 **AVVERTIMENTO**

PERICOLO DI SUFFOCAZIONE E STRANGOLAMENTO

Le lacune all'interno e intorno a questo prodotto possono intrappolare un'uccisione . Le persone con malattia di Alzheimer o demenza, o coloro che sono sedati, confusi o fragili, sono ad aumentato rischio di intrappolamento.

- Non usare MAI a meno che il prodotto non sia stretto contro il materasso, senza spazi vuoti e almeno 12 ½ " dalla testiera e dalla pediera.
- Non usare MAI con i bambini.
- Non utilizzare MAI su lettini per bambini, cuccette, acqua o gonfiabili



Istruzioni di montaggio e installazione

1. Rimuovere tutte le parti dalla confezione e acquisire familiarità con le parti. Rimuovere i perni di sicurezza come mostrato nella Figura 1.

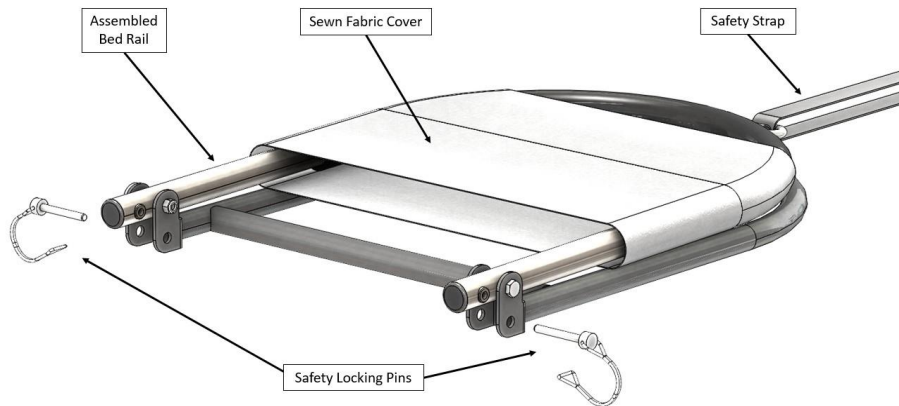


Figura 1

2. Ruotare il tubo della maniglia in posizione verticale a 90 gradi rispetto al tubo di base, come mostrato nella Figura 2.
3. Allineare i fori alla base del tubo della maniglia con i fori nella staffa come mostrato nella Figura 2.
4. Reinscrivere i perni di blocco di sicurezza nei fori allineati per fissare il tubo dell'impugnatura nella posizione utente della guida del letto, come mostrato nella Figura 2.

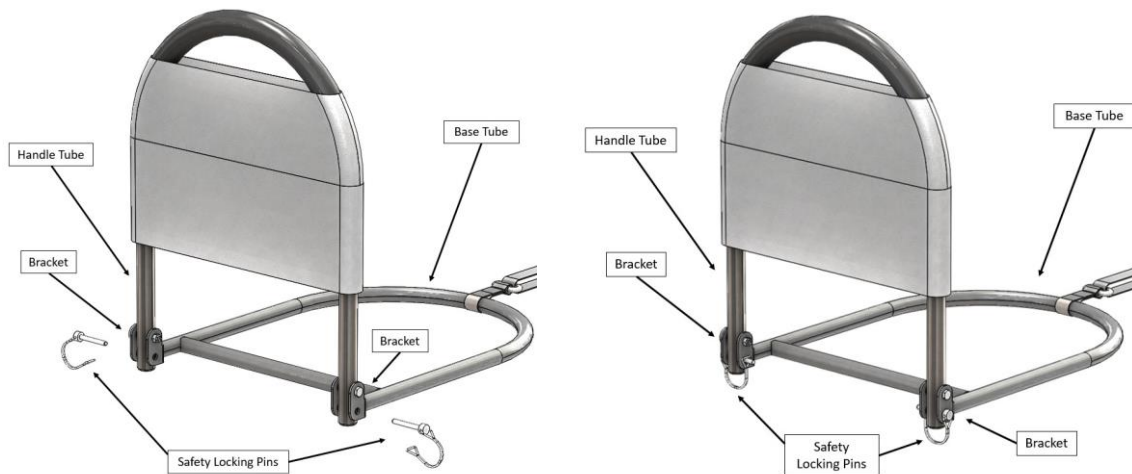


Figura 2

5. Dopo aver reinserto i perni di blocco di sicurezza attraverso i fori allineati, ruotare l'anello del filo sull'estremità dei perni di blocco di sicurezza, come mostrato nella Figura 3.

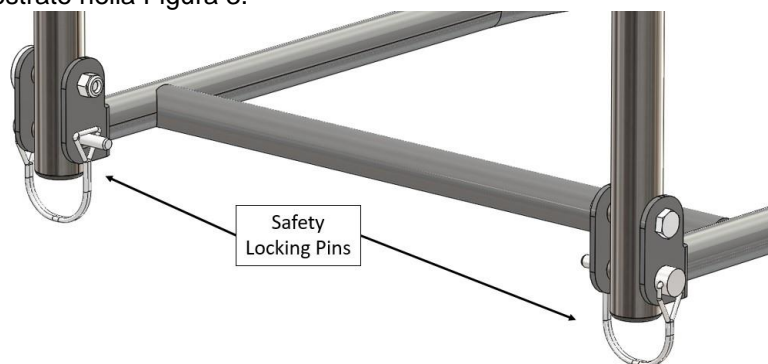


Figura 3

6. **intrappolamento Attenzione:** Fissare la cinghia di sicurezza al telaio del letto, come s hown in Figura 4. cinghia Sfibbi e cinturino anello attorno telaio del letto e ri-fibbia. Stringere la cinghia per fissare il gruppo maniglia contro il lato del materasso. **NON** installare il prodotto senza fissare la CINGHIA DI SICUREZZA al telaio del letto, come mostrato nella Figura 4. In caso di domande, chiamare Stander al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453.

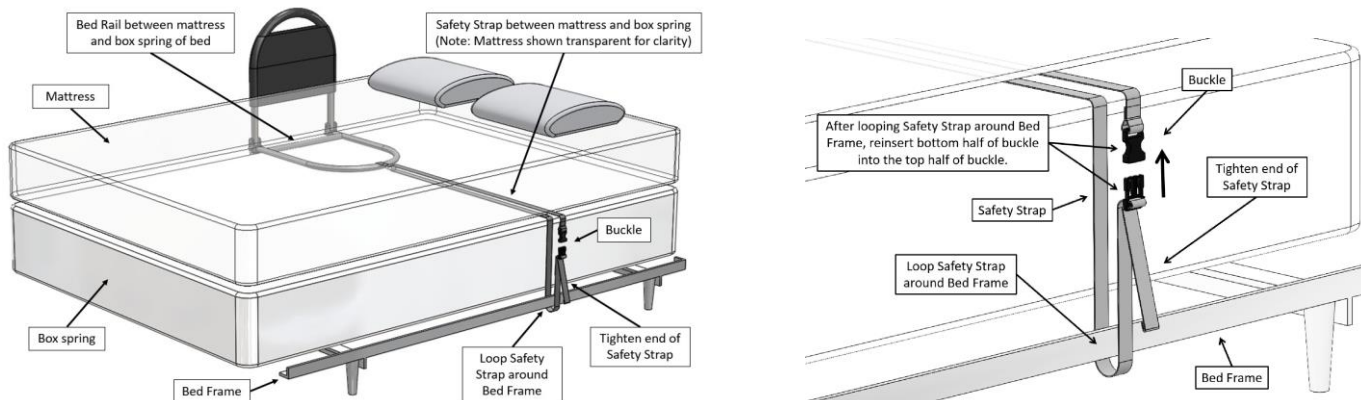


Figura 4

7. **Avvertenza per intrappolamento:** installare la fodera in tessuto cucita sull'impugnatura come mostrato nella Figura 5. **NON** utilizzare il prodotto senza la fodera in tessuto cucita installata. **NON** alterare in alcun modo la fodera in tessuto cucito. La fodera in tessuto cucito aiuta a evitare che rimanga intrappolata nella sponda del letto (consultare il foglio delle **Linee guida per la prevenzione degli intrappolamenti** fornito con queste istruzioni).

NOTA: mantenere il prodotto a 12,5 pollici dall'estremità della testata del letto per evitare problemi di intrappolamento (consultare il foglio delle **Linee guida per la prevenzione degli intrappolamenti** fornito con queste istruzioni). Inoltre, mantenendo l'altezza della maniglia 4 pollici o più aiuta a impedire agli utenti di scavalcare il prodotto, come mostrato nella Figura 5.

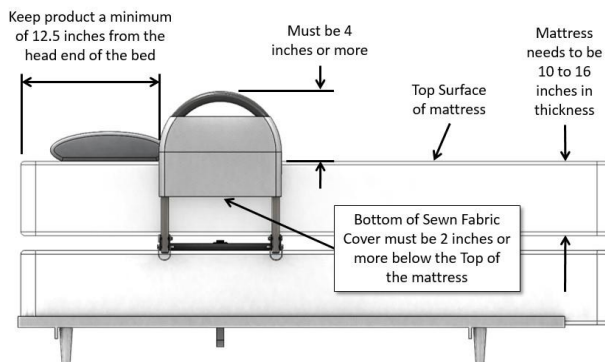


Figura 5

8. È importante che la sponda sia fissata al lato del materasso. La cinghia di sicurezza è attorcigliata attorno al telaio del letto sul lato opposto del letto, allacciata e stretta come mostrato nella Figura 6.

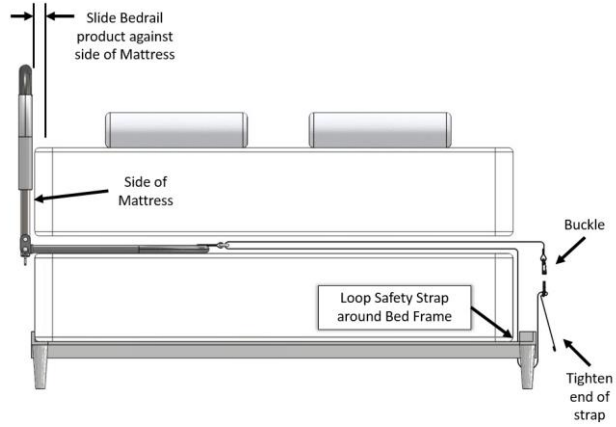


Figura 6