

## **ATENCIÓN**

**Existe un riesgo potencial de lesiones graves o la muerte asociadas con prácticamente todos los productos, independientemente de su tipo o uso previsto. Stander, Inc., ha trabajado incansablemente para minimizar todos los riesgos asociados con sus ayudas de movilidad, sin embargo, dados los tipos de productos, usuarios y una miríada de cosas fuera de nuestro control, no podemos eliminar todos los riesgos imaginables. En consecuencia, un consumidor debe usar el sentido común al utilizar nuestros productos y tener en cuenta la salud física y mental general del usuario.**

**Lea todos los materiales que acompañan a este producto antes de instalarlo o utilizarlo.**

## **GARANTÍA LIMITADA**

Stander, Inc. garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de material y / o mano de obra durante 1 año a partir de la fecha de compra. Durante el período de garantía, corregiremos cualquier defecto de material o mano de obra sin cargo. Todos los gastos de envío deben ser pagados por el comprador original. Cualquier pieza de repuesto será nueva y estará garantizada por el resto de la garantía original o treinta (30) días a partir de la fecha de envío, la que sea más larga. El comprador original debe notificar a Stander, Inc. durante el período de garantía por escrito sobre el defecto en la mano de obra o el material. Esta garantía no es transferible y cubre solo el uso normal. Stander no reembolsará ni pagará los gastos de envío. La garantía NO cubre: (1) Daño durante el envío que no sea el envío original al minorista; (2) Daño causado por archivos adjuntos no autorizados, alteraciones o modificaciones; (3) Daño causado por el uso del producto para fines distintos de aquellos para los cuales el producto fue diseñado o destinado; y (4) Daño causado por cualquier otro abuso, mal uso, mal manejo o aplicación incorrecta.

Bajo ninguna circunstancia Stander, Inc. será responsable de ningún daño especial, incidental o consecuente basado en el incumplimiento de esta garantía limitada, incumplimiento de contrato o responsabilidad estricta.

**NO HAY GARANTÍAS QUE SE EXTENDAN MÁS ALLÁ DE LAS INDICADAS AQUÍ. TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS (INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR), SE RECHAZAN AQUÍ.**

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado. Para obtener servicio bajo esta garantía, puede comunicarse con Stander, Inc. al (800) 506-9901 o al (435) 755-0453.

## **Advertencias**

### **1) INSTALACIÓN:**

- a) No use ni instale este producto a menos que lea y comprenda estas advertencias e instrucciones de ensamblaje para asegurarse de que el producto esté instalado y utilizado correctamente. Si el instalador / usuario (s) está instalando este producto en un hogar de ancianos, un centro de vida asistida o una instalación similar, siga estas y las políticas de instalación de las instalaciones. Si tiene alguna pregunta sobre la instalación, el uso, los riesgos asociados o cualquier cosa relacionada con este producto, llame a Stander Inc. al (800) 506-9901 o al (435) 755-0453.
- b) La instalación incorrecta de este producto aumenta significativamente el riesgo de caídas. Este producto de poste se fija entre el piso y el techo. Debido a que existen muchos tipos diferentes de condiciones de piso y techo, depende del instalador y / o usuario de este producto determinar si el producto puede instalarse de manera segura.
- c) **IMPORTANTE:** El poste puede aflojarse (no está asegurado adecuadamente entre el piso y el techo) como resultado de la miríada de condiciones. Es responsabilidad del instalador y / o usuarios verificar y asegurar periódicamente el poste entre el piso y el techo con la llave incluida. **NO deseche la llave incluida.**
- d) **NO** instale el producto en techos angulados, techos suspendidos o cualquier otro tipo de techo que no permita que el producto se asegure correctamente entre el piso y el techo. El poste debe instalarse perpendicular al piso y al techo. Todas las almohadillas protectoras de goma deben enganchar el techo y el piso con una fuerza igualmente distribuida.
- e) **NO** instale productos de poste en alturas de techo de menos de 7 pies o mayores de 10 pies.
- f) **NO** instale el producto de poste en una plataforma o cualquier otra superficie que se levante del piso. Si tiene preguntas, es responsabilidad del instalador / usuario (s) llamar a Stander Inc. al (800) 506-9901 o (435) 755-0453. **NO** instale este producto si no está seguro de que el producto se puede asegurar correctamente.
- g) Las condiciones del piso también afectan la capacidad de instalar el producto de forma segura. **NO** instale el producto sobre alfombras u otros objetos móviles. **NO** instale el producto en condiciones de piso que permitan que la base del poste se deslice o resbale. Si la base del producto se mueve después de la instalación, el producto no es seguro de usar.
- h) Este producto no está destinado a colocarse dentro de una bañera o dentro de una ducha.
- i) El poste de seguridad utiliza un pasador con resorte que permite que el mango gire y se bloquee en varias posiciones del usuario. Asegúrese de que el mango giratorio esté en una posición bloqueada antes de usar el producto. Si el mango giratorio no está bloqueado antes de usarlo, el usuario puede caerse y provocar lesiones o daños graves.
- j) **IMPORTANTE:** Si instala el producto de poste junto a una cama, sofá, inodoro o cualquier otro objeto, Stander Inc. recomienda **NO** instalar el producto más cerca de la capacidad del usuario para caminar alrededor del poste de manera segura o puede existir la posibilidad de quedar atrapado entre el poste y el costado de cualquier objeto adyacente al poste. El atrapamiento es una condición en la que un individuo puede alojarse entre objetos. El mango giratorio debe tenerse en cuenta al colocar el poste al lado de un objeto adyacente. En otras palabras, el mango puede girar 360 grados. Los usuarios deben poder caminar con seguridad alrededor del poste en cada posición de la manija giratoria. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que no haya forma posible de quedar atrapado entre el poste y / o el mango giratorio y el lado de cualquier objeto adyacente al poste. Dado que hay una gran cantidad de condiciones de usuario, el instalador / usuario (s) debe determinar si el poste debe instalarse más lejos del lado de una cama. Si tiene preguntas, es responsabilidad del instalador / usuario (s) llamar a Stander Inc. al (800) 506-9901 o (435) 755-0453.

### **2) CONDICIONES FÍSICAS Y MENTALES:**

- a) Personas que tienen problemas con limitaciones físicas, parálisis, síntomas de demencia, Alzheimer o pérdida de memoria, sueño, incontinencia, dolor, movimientos corporales incontrolados, levantarse de la cama y caminar sin seguridad sin ayuda, fragilidad, debilidad, confusión, inquietud, terminal. la inquietud, o están bajo la influencia de medicamentos, drogas o cualquier sustancia que pueda perjudicar su equilibrio o juicio, o cualquier otra razón imprevisible que pueda afectar la capacidad física y mental de

los usuarios para usar este producto de manera segura, tienen un mayor riesgo de atrapamiento. Dado que estas condiciones son subjetivas y Stander Inc. no tiene control sobre quién elige usar este producto, es responsabilidad del instalador / usuario consultar a un médico antes de usar este producto.

b) Este producto no está diseñado para transportar todo el peso de una persona. Este producto solo está destinado a proporcionar equilibrio y apoyo mientras está sentado y de pie.

### 3) FACTORES EXTERNOS:

- a) No se debe permitir que los niños se cuelguen o jueguen con este producto.
- b) Debido a factores externos imprevisibles, el producto puede soltarse. Si este es el caso, aumente la tensión entre el piso y el techo con la llave incluida. NO deseche la llave incluida.
- c) Las condiciones del piso pueden afectar la estabilidad del poste, como irregularidades del piso, superficies mojadas u otras condiciones que permitirían que la base del producto se mueva. NO use el producto en superficies de piso que permitan que la base del producto se mueva.
- d) Si se retira y reinstala el producto, el poste debe reinstalarse correctamente como se indica en estas instrucciones. Guarde las instrucciones para referencia futura.

### 4) ACUERDO ENTRE EL INSTALADOR / USUARIO (S) Y STANDER INC .:

- a) Si el instalador / usuario (s) elige usar este producto, se entiende entre el instalador / usuario (s) Y Stander Inc., que el instalador / usuario (s) acepta los riesgos asociados con el uso de este producto. Dado que estas condiciones son subjetivas y Stander Inc. no tiene control sobre quién elige usar este producto, el instalador / usuario (s) acepta ser responsable de sus decisiones al usar este producto.

### 5) DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y ACUERDO DE ARBITRAJE:

- a) Este acuerdo de arbitraje ("Acuerdo") afecta sus derechos y recursos legales al proporcionar que las disputas entre usted y la fabricación de este producto ("Stander") deben resolverse mediante un arbitraje vinculante, en lugar de en un tribunal. Lea este acuerdo detenidamente a medida que acepta los términos de este acuerdo al ensamblar y usar este producto. Si no está de acuerdo con los términos de este acuerdo, devuelva el producto a la ubicación de compra para obtener un reembolso.

i) RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES O DISPUTAS. Cualquier reclamo o disputa entre usted y Stander que surja o se relacione de alguna manera con el Producto o este Acuerdo se resolverá mediante un arbitraje vinculante final. Esta obligación de arbitraje se aplica independientemente de si el reclamo o disputa involucra un agravio, fraude, tergiversación, responsabilidad del producto, negligencia, violación de un estatuto o cualquier otra teoría legal. Tanto usted como Stander reconocen y aceptan específicamente que renuncia a su derecho a presentar una demanda basada en tales reclamos o disputas y que un juez o jurado resuelva dicha demanda.

ii) LIMITACIÓN DE RECURSOS LEGALES. Todos los arbitrajes bajo este Acuerdo se llevarán a cabo de manera individual (y no a nivel de toda la clase) y un árbitro no tendrá autoridad para otorgar desagravio a toda la clase. Usted reconoce y acepta que este Acuerdo le prohíbe específicamente iniciar procedimientos de arbitraje como representante de otros o unirse a cualquier procedimiento de arbitraje presentado por cualquier otra persona. iii) PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE.

(1) Antes de comenzar cualquier procedimiento de arbitraje bajo este Acuerdo, primero debe presentar el reclamo / disputa a Stander llamando al (800) 506-9901 o (435) 755-0453, proporcionando la información de contacto solicitada y permitiendo a Stander la oportunidad de resolverlo. . Si su reclamo o disputa no se resuelve dentro de los sesenta (60) días, puede iniciar un procedimiento de arbitraje de acuerdo con los términos de este Acuerdo.

(2) El arbitraje de reclamo (s) / disputa (s) bajo este Acuerdo se realizará de conformidad con la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA") Procedimientos de resolución de disputas comerciales de los Estados Unidos y procedimientos complementarios para disputas relacionadas con el consumidor (consulte [www.adr.org](http://www.adr.org) para conocer sus reglas y procedimientos).

(3) El arbitraje de cualquier reclamo / disputa bajo este Acuerdo se realizará en el Estado de Utah.

(4) Todos los gastos administrativos de los procedimientos de arbitraje bajo este Acuerdo se dividirán en partes iguales entre usted y la Compañía, excepto que: (a) si las reclamaciones / disputas sujetas a los procedimientos de arbitraje son inferiores a diez mil dólares (US \$ 10,000), usted será responsable de no más de ciento veinticinco dólares (US \$ 125) en gastos administrativos; (b) si el reclamo / disputa sujeto a los procedimientos de arbitraje es más de diez mil dólares (US \$ 10,000) pero menos de setenta y cinco mil dólares (US \$ 75,000), entonces usted será responsable de no más de trescientos setenta y cinco dólares (US \$ 375) en gastos administrativos; y (c) si el reclamo / disputa sujeto a los procedimientos de arbitraje es superior a setenta y cinco mil dólares (US \$ 75,000), entonces usted será responsable de los gastos administrativos de acuerdo con el Anexo de tarifas comerciales proporcionado por la AAA. Usted reconoce y acepta que cada parte pagará los honorarios y costos de sus propios abogados, expertos y testigos.

iv) ELECCIÓN DE LEY Y SEPARABILIDAD. Este Acuerdo se regirá por la Ley Federal de Arbitraje de los Estados Unidos y las leyes del estado de Utah. Si alguna disposición de este Acuerdo se declara o se considera ilegal, inaplicable o nula, dicha disposición será ineficaz solo en la medida en que se considere ilegal, inaplicable o nula y el resto seguirá siendo plenamente aplicable.

**⚠ ADVERTENCIA**  
**PELIGRO DE ENTRADA Y CAÍDA**

Las lagunas en y alrededor de este producto pueden atrapar y matar. Las personas con enfermedad de Alzheimer o demencia, o aquellas que están sedadas, confundidas o frágiles, tienen un mayor riesgo de atrapamiento. Las personas que intentan escalar este producto tienen un mayor riesgo de lesiones o muerte por caídas. Asegúrese siempre de que este producto esté bien sujeto a la cama. Si el producto puede alejarse de la cama o el colchón, puede provocar atrapamiento y la muerte.

**⚠ ADVERTENCIA**  
**PELIGRO DE SUFOCACIÓN Y ESTRANGULACIÓN**


Las lagunas en y alrededor de este producto pueden atrapar y matar. Las personas con enfermedad de Alzheimer o demencia, o aquellas que están sedadas, confundidos o frágiles, tienen un mayor riesgo de atrapamiento.

- NUNCA use a menos que el producto esté apretado contra el colchón, sin espacios, y al menos a 12 ½ " de la cabecera y el estribo.
- NUNCA use con niños.
- NUNCA use en camas para niños pequeños, literas, agua o inflables




## Instrucciones de montaje e instalación:

1. Retire todos los componentes de la caja y verifique que todas las partes estén incluidas como se muestra en la Figura 1.

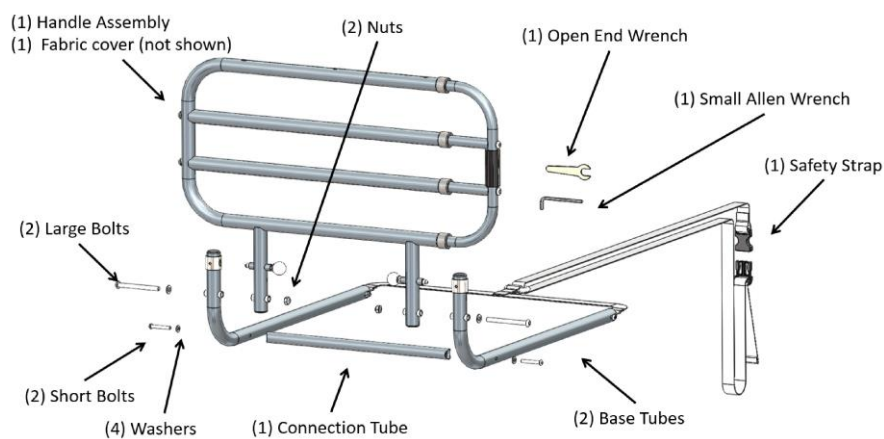

**FIGURA 1**



2. Use la Llave Allen para unir el TUBO DE CONEXIÓN a los TUBOS DE LA BASE usando LOS PERNOS CORTOS y ARANDELAS como se muestra en la Figura 2. NOTA: Las tuercas están soldadas en el interior del TUBO DE CONEXIÓN.

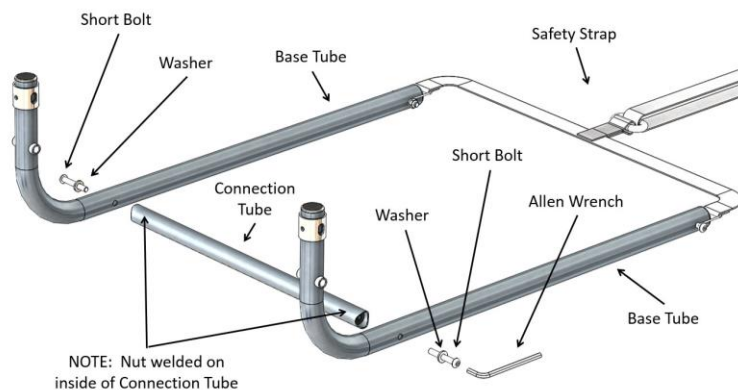



**FIGURA 2**

3. Determine en qué lado de la cama instalar el riel de la cama. Deslice la estructura base ensamblada de la Figura 2, entre el colchón y el somier de la cama como se muestra en la Figura 3.

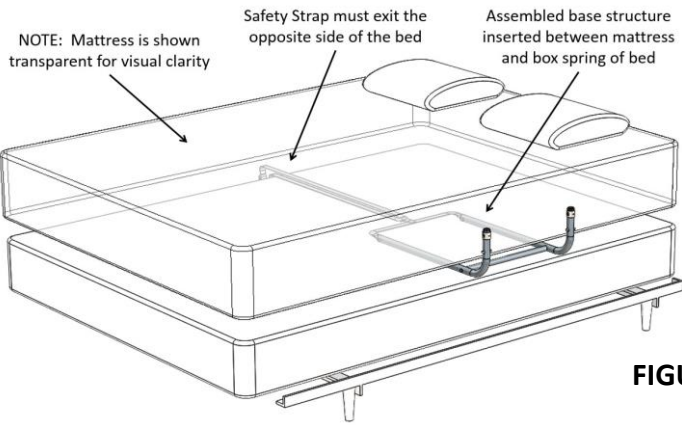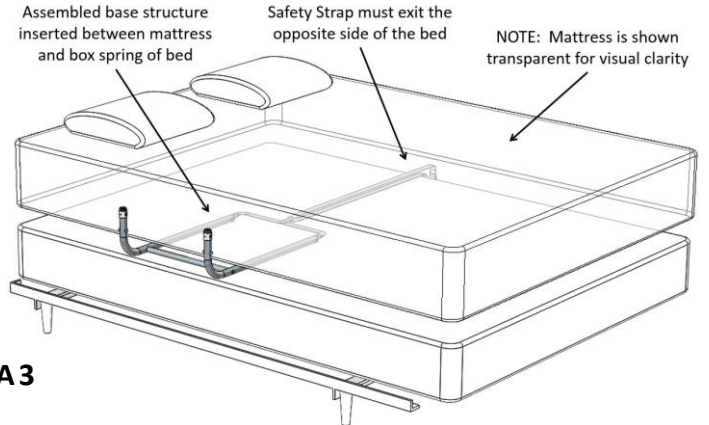



**LADO DERECHO DE LA INSTALACIÓN DE LA CAMA****LADO IZQUIERDO DE LA INSTALACIÓN DE LA CAMA****FIGURA 3**

4. NOTA: Hay dos direcciones diferentes para instalar el riel de la cama. El LADO DE EXTENSIÓN DEL CARRIL DE LA CAMA debe estar más cerca del PIE DE LA CAMA como se muestra en la Figura 4.

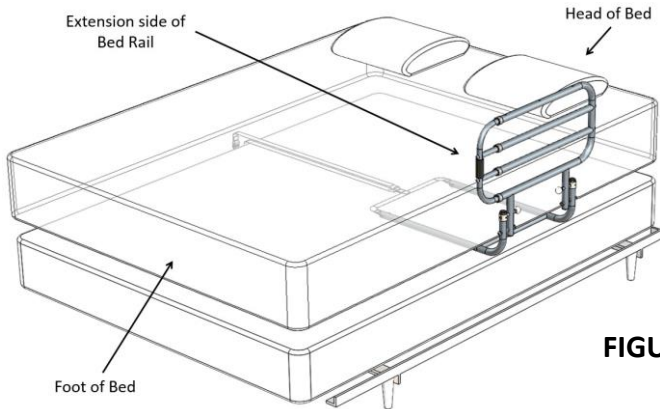
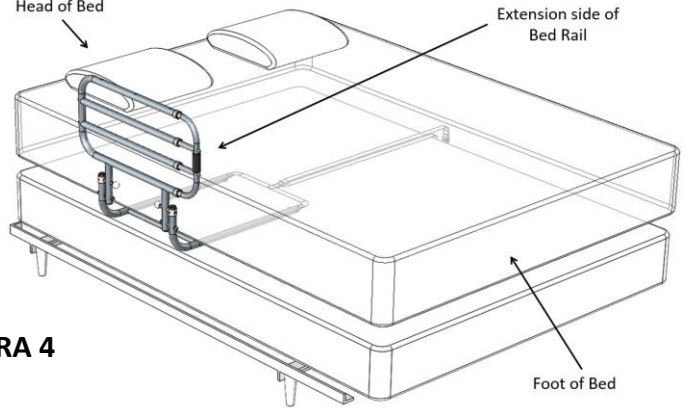
**LADO DERECHO DE LA INSTALACIÓN DE LA CAMA****LADO IZQUIERDO DE LA INSTALACIÓN DE LA CAMA****FIGURA 4**

5. Asegure el mango, como ENSAMBLADO a la estructura de base con tornillos largos, ARANDELAS, y NUTS como se muestra en la Figura 5.

NOTA: La cama no se muestra para mayor claridad visual.

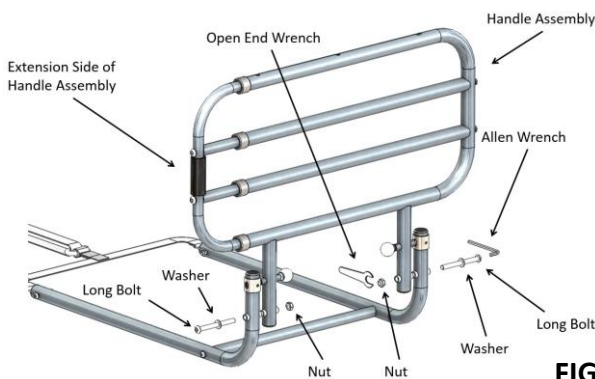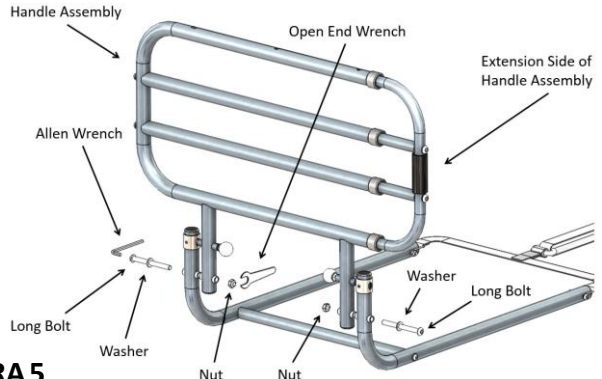**LADO DERECHO DE LA INSTALACIÓN DE LA CAMA****LADO IZQUIERDO DE LA INSTALACIÓN DE LA CAMA****FIGURA 5**

6. **IMPORTANTE !!!** Asegure la CORREA DE SEGURIDAD al marco de la cama, como se muestra en la Figura 6. Desabroche la correa y la correa de bucle alrededor del marco de la cama y vuelva a abrocharla. Apriete la correa para asegurar el ensamblaje de la manija contra el costado del colchón. NO INSTALE EL PRODUCTO SIN ASEGURAR LA CORREA DE SEGURIDAD AL MARCO DE LA CAMA COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA 6. SI TIENE ALGUNA PREGUNTA, LLAME AL STANDER AL (800) 506-9901 o (435) 755-0453.

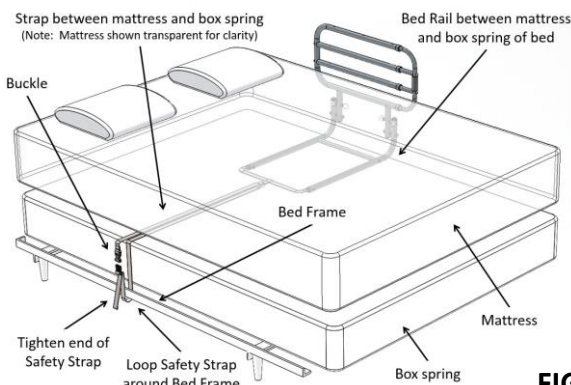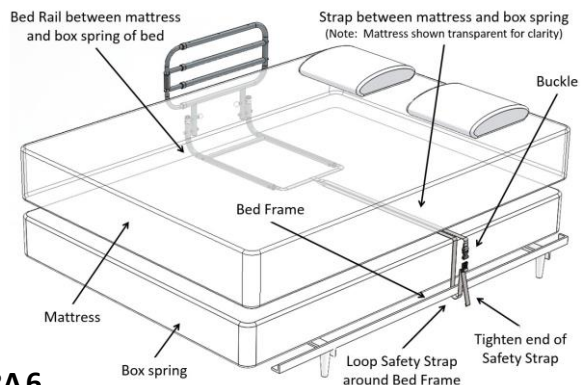**LADO DERECHO DE LA INSTALACIÓN DE LA CAMA****LADO IZQUIERDO DE LA INSTALACIÓN DE LA CAMA****FIGURA 6**

7. Para extender el riel de la cama, presione el botón en la parte superior del riel de la cama y tire del lado de extensión del riel de la cama hacia afuera. Para bajar el riel de la cama, tire y gire las perillas 90 grados hasta que el pasador índice se enganche en la ranura corta, como se muestra a continuación en la Figura 7.

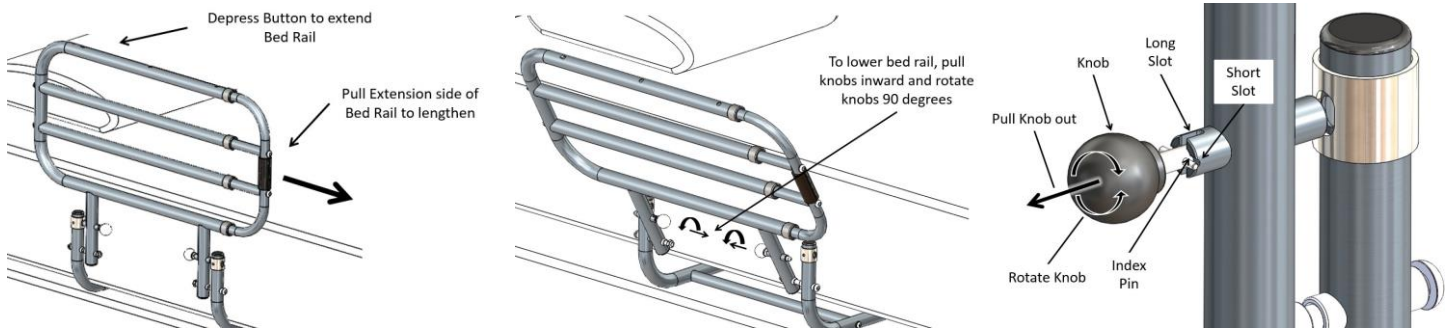


FIGURA 7

8. **ADVERTENCIA:** Para propósitos de seguridad , es importante que se cumplan las dos condiciones que se muestran a continuación. Primero, la barra horizontal inferior del riel de la cama debe estar a 3 "debajo de la superficie superior del colchón. Segundo, no debe existir espacio entre el riel de la cama y el costado del colchón. Asegure la CORREA SAFE TY al marco de la cama, como se muestra en la Figura 6 anterior. Desabroche la correa y la correa de bucle alrededor del marco de la cama y vuelva a abrocharla. Apriete la correa para asegurar el ensamblaje de la manija contra el costado del colchón como se ve en la Figura 8.

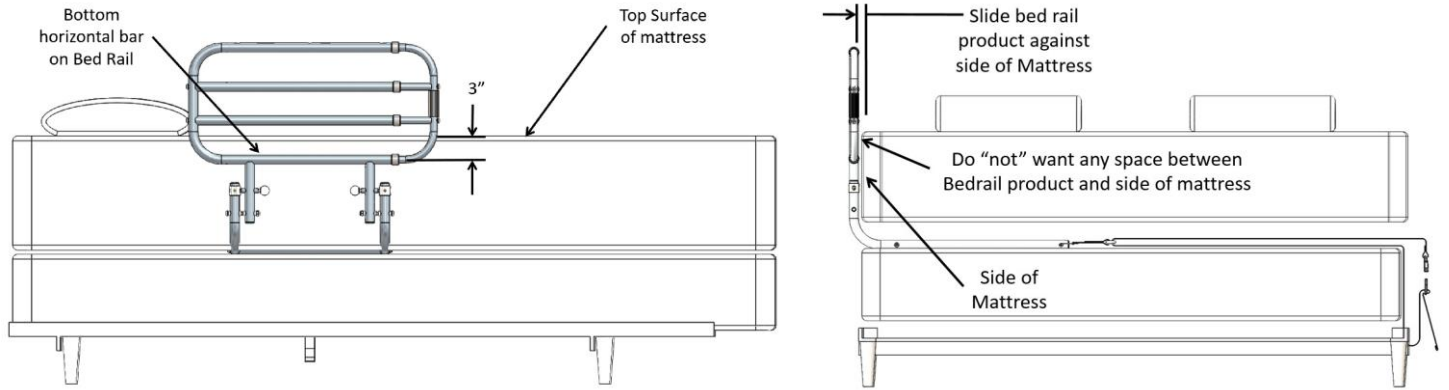


FIGURA 8