


## Montageanleitungen:


1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und machen Sie sich mit den einzelnen Elementen vertraut (siehe Figur 1).

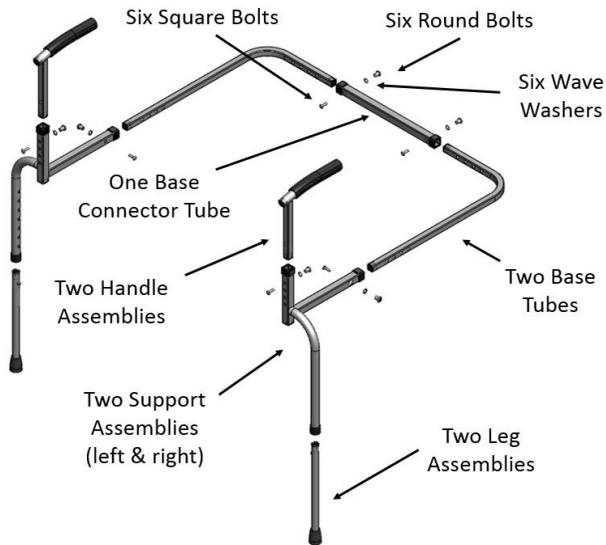

**FIGUR 1**

**HINWEIS:** Abbildung 2 zeigt das zusammengebaute Produkt, das auf zwei verschiedene Arten verwendet wird. Bei einigen Stühlen, Liegen und Sofas muss der Produktrahmen auf einem Kissen platziert werden (da das Kissen nicht entfernt werden kann), und bei einigen Stühlen, Liegen und Sofas kann der Produktrahmen unter dem Kissen platziert werden.

2. Stellen Sie vor dem Zusammenbau des Produkts fest, ob der Rahmen des Produkts auf dem Kissen oder unter dem Kissen platziert wird. Bestimmen Sie dann die gewünschte Höhe des Griffs sowie die Breite und Tiefe des zusammengebauten Rahmens, die zu Ihrem Stuhl, Ihrer Liege oder Ihrer Couch passen.

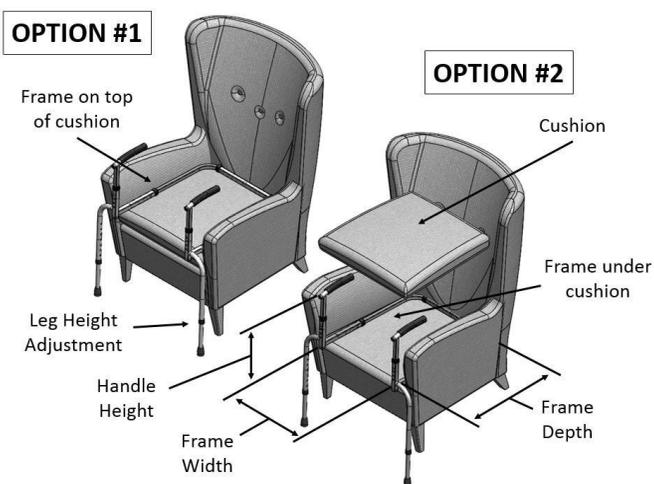


**FIGUR 2**

3. Setzen Sie die Griffbaugruppen in die Stützbaugruppen ein und stellen Sie die Griffbaugruppen auf die gewünschte Höhe ein. Befestigen Sie die Griffbaugruppen mit Vierkantschrauben und Rundmuttern (siehe Abbildung 3).

**Hinweis:** Vierkantschrauben (Schrauben mit Vierkanthals) werden immer zu Vierkantlöchern


und Rundmuttern zu Rundlöchern zusammengebaut. Schieben Sie die Wellenscheibe vor dem Zusammenbau auf die runde Mutter.

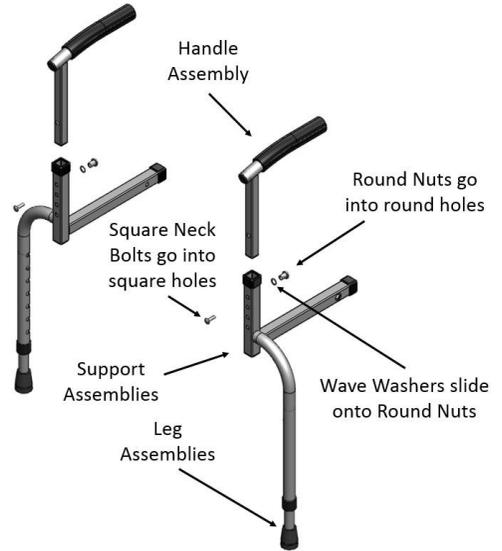

**FIGUR 3**


**Hinweis:** Montieren Sie die Griffbaugruppen aus Sicherheitsgründen nur in der in Figur 3 gezeigten Richtung.

4. Setzen Sie die Basisrohre in die Stützbaugruppen ein. Stellen Sie die Basisrohre auf die Rahmentiefe ein, die zu Ihrem Stuhl, Ihrer Liege oder Ihrer Couch passt, und befestigen Sie die Basisrohre mit den Vierkantschrauben und runden Muttern (siehe Figur 4).

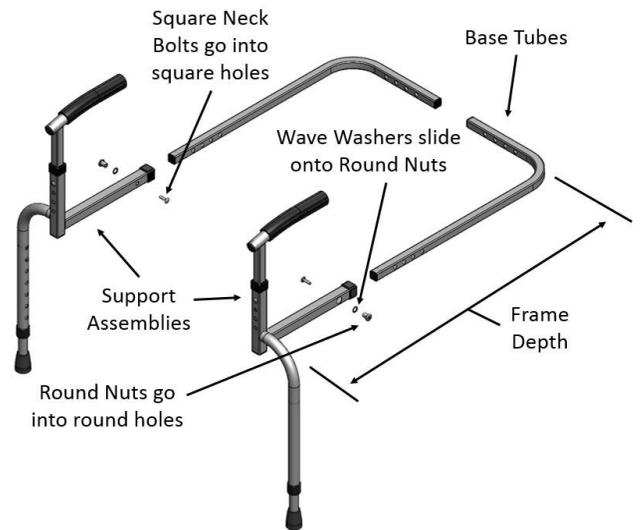


**FIGUR 4**

5. Führen Sie die Basisrohre in das Basisanschlussrohr ein. Stellen Sie die Basisrohre auf die Rahmenbreite ein, die zu Ihrem Stuhl, Ihrer Liege oder Ihrer Couch passt, und befestigen Sie die Basisrohre mit den Vierkantschrauben und Rundmuttern (siehe Figur 5).

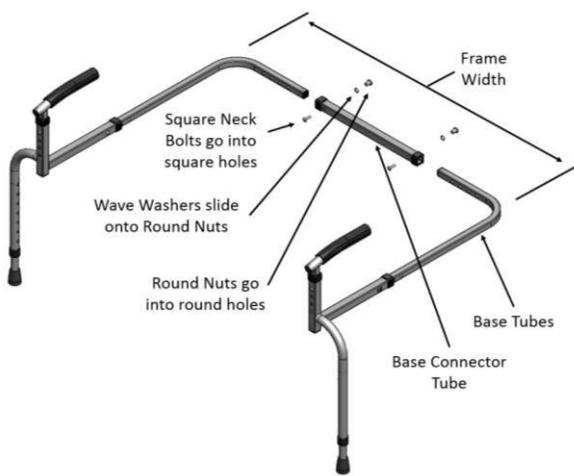

**FIGUR 5**

6. Positionieren Sie das Produkt auf Ihrem Stuhl, Ihrer Liege oder Ihrer Couch und drücken Sie die Federstifte, um das Bein wie in Figur 6 gezeigt auf den Boden einzustellen.

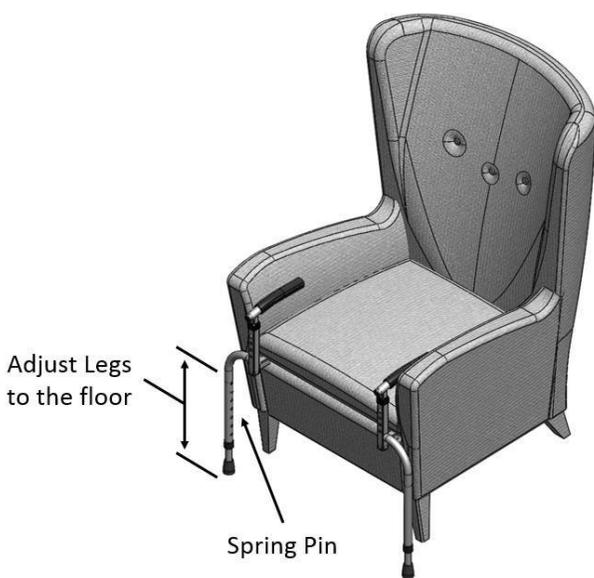

**FIGUR 6**

## SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

1. Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß installiert ist, kann dies zu schweren Verletzungen oder Schäden führen. Die Marke Able Life von Stander Inc. ist bestrebt, sichere Produkte bereitzustellen und den Benutzer über Möglichkeiten zur Verhinderung von Unfällen zu informieren.
  - ✓ Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Vierkantschrauben und Rundmuttern sicher sind.
  - ✓ Stellen Sie sicher, dass die verstellbaren Beine immer den Boden berühren.
  - ✓ Für Benutzer mit hohem Risiko sollten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Zu den Anwendern mit hohem Risiko zählen Personen, die nicht geistig bei Bewusstsein sind (einschließlich Personen, die unter Medikamenten stehen), Benutzer mit Größen- oder Gewichtsbedingungen oder Bedingungen, die ihre Fähigkeit beeinträchtigen, das Produkt ohne Unterstützung zu verwenden.

✓ Wenn Sie Bedenken oder Fragen zu diesen Vorsichtsmaßnahmen haben, wenden Sie sich unter 1-800-5069901 an die Marke Able Life von Stander Inc.

2. Wenn Sie an einer Krankheit oder Verletzung leiden oder Medikamente einnehmen, die Ihr Gleichgewicht oder Ihre Fähigkeit zum Stehen oder Sitzen beeinträchtigen, sollten Sie vor der Verwendung dieses Produkts zuerst einen Arzt konsultieren. Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß verwendet wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder Schäden führen.
3. Das Produkt sollte nicht das volle Gewicht einer Person tragen. Dieses Produkt ist nur dazu gedacht, Gleichgewicht und Unterstützung beim Sitzen und Stehen zu bieten.
4. Kinder dürfen nicht am Produkt hängen oder damit spielen.
5. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Weder Stander Inc. noch der Hersteller haften für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung oder Montage des Produkts entstehen können oder entstanden sind.

## EINGESCHRÄNKTE GARANTIE:

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Able Life-Markenprodukts durch Stander Inc. Wir hoffen, dass es Ihnen den Alltag erleichtert. Bitte lesen Sie zu Ihrem Schutz die folgende Garantieerklärung.

Die Marke Able Life von Stander Inc. garantiert dem ursprünglichen Käufer, dass dieses Produkt 1 Jahr ab Kaufdatum frei von Material- und / oder Verarbeitungsfehlern ist.

Während der Garantiezeit wird die Marke Able Life von Stander Inc. Material- oder Verarbeitungsfehler kostenlos korrigieren. Der ursprüngliche Käufer muss jedoch die Versandkosten im Voraus bezahlen. Alle Ersatzteile sind neu und werden für den Rest der ursprünglichen Garantie oder dreißig (30) Tage ab Versanddatum garantiert, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Der Erstkäufer muss Stander Inc. während der Garantiezeit schriftlich über den Verarbeitungs- oder Materialfehler informieren. Diese Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für den normalen Gebrauch. NEIN VERSANDKOSTEN SIND RÜCKERSTATTBAR.

Die Garantie deckt NICHT Folgendes ab:

- Schäden während des Versands, die nicht dem Originalversand an den Einzelhändler entsprechen.
- Schäden durch nicht autorisierte Anhänge, Änderungen oder Modifikationen.
- Schäden, die durch die Verwendung des Produkts für andere als die Zwecke verursacht wurden, für die das Produkt entworfen oder bestimmt wurde.
- Schäden, die durch anderen Missbrauch, Missbrauch, Missbrauch oder falsche Anwendung verursacht wurden.

Stander Inc. haftet unter keinen Umständen für besondere, zufällige oder Folgeschäden, die auf einer

Verletzung dieser beschränkten Garantie, einer Vertragsverletzung oder einer verschuldensunabhängigen Haftung beruhen.

ES GIBT KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE ERWEITERT WERDEN

Jenseits der Beschreibung auf dem Gesicht hiervon.

Alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (einschließlich aller stillschweigenden Garantien der Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck) werden hiermit ausgeschlossen.

In einigen Staaten sind Einschränkungen für die Dauer einer impliziten Garantie nicht zulässig. Daher gilt die oben genannte Einschränkung möglicherweise nicht für Sie. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind.

Um einen Service im Rahmen dieser Garantie zu erhalten, können Sie Stander Inc. unter 1-800-506-9901 erreichen.

## BEACHTEN

NICHT ZURÜCK ZUM LAGERN:  
Bei Problemen wenden Sie sich bitte an  
Stander Inc. unter  
1-800-506-9901 für Unterstützung.

