



ABLE LIFE<sup>®</sup>  
Comfortably Independent

### ABRIR Y CERRAR EL RODADOR:

**MANTENIMIENTO:** El andador tiene lubricante aplicado en las juntas de plástico que se deslizan a lo largo de la tubería de aluminio. Este lubricante finalmente se secará y hará que el andador sea más difícil de abrir y cerrar. Cuando esto ocurra, aplique un spray de silicona entre las juntas plásticas y el tubo de aluminio. Esto se puede obtener de las ferreterías locales.

Para abrir el andador, desabroche la hebilla, separe las manijas y empuje hacia abajo el asiento como se muestra en la Figura 1.

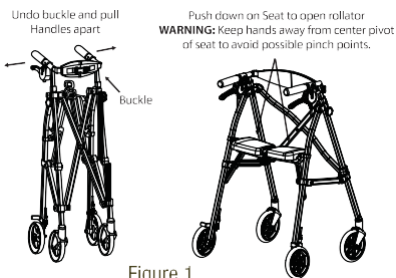


Figure 1

**ADVERTENCIA:** Mantenga las manos alejadas del pivote central del asiento para evitar posibles puntos de pellizco. Para cerrar el andador, tire del asa entre las almohadillas del asiento. Empuje las manijas juntas y cierre la hebilla como se muestra en la Figura 2.

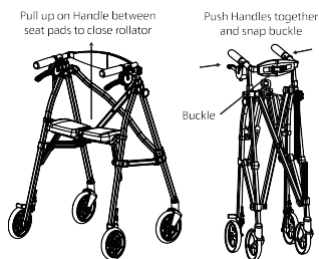


Figure 2


### AJUSTE DE ALTURA DEL MANGO

Con el andador en posición abierta, retire las perillas y los pernos. Coloque la manija a la altura deseada, alineando los agujeros en los tubos de la manija. Vuelva a insertar el perno y apriete la Perilla como se muestra en la Figura 3. La altura del mango se ajusta a 33"-36".


### OPERACIÓN DE FRENO:

Los frenos del mango tienen dos funciones, como se muestra en la Figura 3. Tire hacia arriba de la palanca de freno para proporcionar la acción de frenado. Presione hacia abajo la palanca de freno para bloquear los frenos y evitar que el andador se mueva mientras está sentado.

**ADVERTENCIA:** Los frenos deben estar bloqueados antes de sentarse.

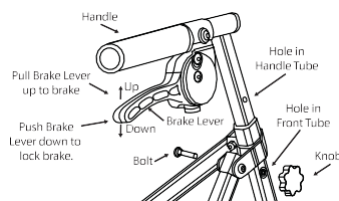

**AJUSTE DE LA TENSION EN EL CABLE DE FRENO:** Cuando el mango del freno ya no puede proporcionar suficiente resistencia de frenado, será necesario ajustar la tensión del cable. Sujete la tuerca del cable con unos alicates y gire el tornillo de mariposa del cable en el sentido contrario a las agujas del reloj para promover una distancia más cercana entre la pastilla de freno y la rueda.

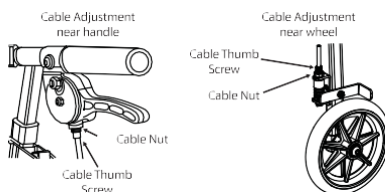

## GET A FREE AUTO ASSIST HANDLE™ WHEN YOU REGISTER & LEAVE A REVIEW!

(Just pay shipping & handling)



- Safely stand with ease
- Universal fit

To register your product, please visit:  
[ablelifesolutions.com/product-registration](http://ablelifesolutions.com/product-registration)

### **ATENCIÓN**

No es un potencial riesgo de graves lesiones o la muerte asociada a prácticamente todos los productos, independientemente de su tipo o la intención de usar. Stander, Inc., tiene un trabajo sin descanso para minimizar todos los riesgos asociados con su movilidad, ayudas, sin embargo, dado los tipos de productos, usuarios, y un sinnúmero de cosas fuera de nuestro control de, que no puede eliminar todos los imaginables riesgos. Accidentalmente, un consumidor debe usar el sentido común al utilizar nuestros productos y considerar el usuario's general física médica y mental. Lea todos los materiales que acompañan a este producto antes de usar.

### **GARANTÍA LIMITADA**

Stander, Inc. garantiza que el original, el comprador que este producto enfermo esté libre de defectos de materiales y / o mano de obra durante 1 año a partir de la fecha de compra. Durante la garantía período que vamos a corregir los defectos en el material o mano de obra en ningún cargo. Todos los gastos de envío deben ser pagados por el comprador original. Cualquier reemplazo de partes serán ser nuevo y están garantizados para el resto de la original de garantía o treinta (30) días a partir de la fecha de marineros, todo que es más largo. El original, el comprador debe notificar Stander, Inc. durante el periodo de garantía en la escritura de la defectos en mano de obra o materiales. Esta garantía es no transferible y covers única normal de uso. Stander enfermos no reembolso o pago de cualquier envío cargos. La garantía NO cubre:

- (1) Daño durante el envío que no sea el envío original al minorista;
- (2) daños causados por no autorizado un TTAC implementos, un lettering, o modificaciones;
- (3) El daño causado usando el producto para fines otros que aquellos para el cual el producto fue diseñado ni está destinado;
- (4) Daño causado por cualquier otro abuso, mal uso, mal manejo o aplicación incorrecta.

Esta garantía SOLO cubre un reemplazo de 30 días de RUEDAS rotas y CONJUNTO DE FRENO / CABLE y NO cubre PASTILLAS DE FRENO Y PUÑOS DE MANGO que malos llevar a cabo más de tiempo. Bajo ninguna circunstancia se Stander, Inc. ser responsables de cualquier especial, incidental, o consecuentes daños en base al incumplimiento de esta limitación de De Garantía, incumplimiento de contrato, o estricta responsabilidad.

**NO HAY GARANTÍAS QUE SE EXTENDAN MÁS ALLÁ DE LAS INDICADAS AQUÍ. TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS (INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR), SE RECHAZAN AQUÍ.**

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la forma larga de una implícita garantía dura, por lo que la anterior limitación puede no aplicarse a usted. Esta garantía le da usted específicos legales derechos, y que puede también tener otros derechos que varían de estado a estado. Para obtener servicio bajo esta De Garantía, que puede llegar a Stander, Inc. al (800) 506-9901 o (435) 755-0453.

## Advertencias

### 1) INSTALACIÓN / USO:

- a) No , no utilizar o instalar este producto a menos que leer y entender estas advertencias y montaje instrucciones para garantizar el producto está correctamente instalado y utilizado . Si instalador / usuario (s) están instalando este producto en una enfermería en casa , asistida vivienda centro , o una parecida instalación , siga estos y las instalaciones de instalación políticas . Si tiene alguna pregunta con respecto a la instalación , uso , o cualquier otros riesgos , o nada en absoluto con respecto a este producto llamado Stander Inc. al (800) 506 a 9901 o (435 ) 755 a 0453 .
- b) Inadecuada instalación , mantenimiento , y / o impropio uso de este producto significativamente incrementa el riesgo de caídas .
- c) Me f que have pregunta si camiseta T i S ° e en s ta l é r / uso ( ) s responsabilidad a llamar Stander Inc . en (800) 506-9901 o (435) 755-0453 .
- d) Este producto se no pretende para ser colocado dentro de una ducha .

### 2) CONDICIONES FÍSICAS Y MENTALES :

- a) Las personas que tienen problemas con la física Limitaciones , la parálisis , los síntomas de la demencia , la enfermedad de Alzheimer o la memoria perdida , dormir , incontinencia , dolor , incontrolada cuerpo movimiento , levantarse de la cama y caminar en condiciones de riesgo y sin la asistencia , la fragilidad , debilidad , confusión , inquietud , terminal de inquietud , o están bajo la influencia de medicamentos , drogas o cualquier sustancia que pudiera afectar su equilibrio o juicio electrónico , o r una y othe r unforeseeable razones que podrían afectar a los usuarios física y mental, capacidad de forma segura utilizar este producto. Dado que estas condiciones son subjetiva y Stander Inc . tiene ningún control de quien elige a utilizar este producto , que es el instalador / nos er ( s) la responsabilidad de consultar a un médico antes de usar este producto.
- b) Este producto solo está destinado a proporcionar equilibrio y apoyo al caminar . El usuario debe no e xceedthe 250 lb máximo usuario peso capacidad .

### 3) FACTORES EXTERNOS :

- a) Los niños deben no ser allowed a colgar en o jugar with este producto.
- b) El mantenimiento adecuado es importante. Comprueba el frenos durante cada uso de la producto para asegurar tanto el frenado y el freno de bloqueo están funcionando correctamente . El freno de cable w enfermos tramo más tiempo y freno almohadillas w enfermos desgaste sobre el tiempo . Esto va a disminuir el frenado de la capacidad de la mano de frenos sistema .  
No debe ser suficiente compromiso entre los frenos de ratón y las traseras ruedas de frenado y para evitar que el andador de movimiento mientras el usuario se está sentado .

como un representante de los demás o unirse en cualquier arbitraje procedimientos presentados por cualquier otra persona . iii)

#### **4) ACUERDO ENTRE EL INSTALADOR / USUARIO (S) Y STANDER INC .:**

a) Si el instalador / usuario (s) elige a utilizar este producto , se entiende entre el instalador / usuario (s) y Stander Inc . , Tha t ° e en s ta l e r / usuario (s) a c e p t e l corre el riesgo asociado con el uso de este producto. Dado que estas condiciones son subjetivas y Stander Inc . tiene ningún control de sobre quien elige a usar este producto , el instalador / usuario (s) de acuerdo en ser responsable de sus decisiones cuando el uso de este producto.

#### **5) DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y ACUERDO DE ARBITRAJE :**

a) El presente acuerdo de arbitraje (Acuerdo) afecta a los legales derechos y remedios por proporcionar que las disputas entre usted y la fabricación de este producto (Stander), deben resolverse a través bindin g arb i tra t o i n , en lugar del th a n i n u n a c o u r t . Por favor, lea este acuerdo cuidadosamente como usted acepta los términos de este acuerdo por el montaje y el uso de este producto. Si usted qué no está de acuerdo con los términos de este acuerdo , devolver el producto a la ubicación de la compra para un reembolso .

#### **i) RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES O DISPUTAS.**

Cualquier reclamación o disputa entre usted y Stander que surge fuera de o relacionado en cualquier forma a la del producto o este Acuerdo serán resueltas a través final, vinculante de arbitraje. Esta obligación de arbitraje se aplica independientemente de W a sea el reclamo o controversia implica un agravio , fraude , falsedad , la responsabilidad del producto , negligencia , violación de un estatuto , o cualquier otra teoría legal. Tanto usted como Stander específicamente reconocer y estar de acuerdo en que se renuncia a su derecho de llevar una demanda basada en este tipo de reclamaciones o disputas y para tener tal demanda resuelta por un juez o jurado. ii) LIMITACIÓN DE RECURSOS LEGALES.

Todos los arbitrajes bajo este Acuerdo deberán ser llevado a cabo solamente en un individuo (y no una clase de ancho) base y un árbitro deberán tener ninguna autoridad para premio de toda la clase de reliquia . f Usted ackno w ledgeand acepta que este Acuerdo específicamente le prohíbe iniciar el arbitraje procedimientos

#### **PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE.**

(1) antes de iniciar cualquier procedimiento de arbitraje bajo thi s A g reem e n t , usted debe abetos t presen t ° e Clal m /disputa a Stander por llamar (800) 506-9901 o ( 435) 755-045 3providin g solicitado contacto informatio n y permitiendo Stander la oportunidad de resolverlo. su reclamo o disputa es no resueltos dentro de los sesenta (60) días, usted puede iniciar un procedimiento de arbitraje de conformidad con los términos de este Acuerdo.

- La falta de cumplir con las instrucciones y **Las ADVERTENCIAS** podrían poner a los usuarios en riesgo de caerse.

(2) El arbitraje de reclamo (s /) disputa (s) bajo este Acuerdo se realizará de conformidad con los Procedimientos de resolución de disputas comerciales de los Estados Unidos de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) y los Procedimientos suplementarios para disputas relacionadas con el consumidor (ver [www . ADR . Org](http://www.Adr.Org) para sus reglas y procedimientos . )

(3) El arbitraje de cualquier reclamo / disputa bajo este Acuerdo se realizará en el Estado de Utah .

(4) Todos los gastos administrativos de los procedimientos de arbitraje bajo este Acuerdo se dividirán en partes iguales entre usted y la Compañía , excepto que:

(a) si la reclamaciones / disputas sujetas a las de arbitraje procedimiento es menos de diez mil dólares (US \$ 10 , 000) , que w enfermedad sea responsable de no más de ciento veinticinco dólares (US \$ 125) en administrativos gastos; (b) si la reclamación / controversia sujeta a las de arbitraje procedimiento es más de diez mil dólares (US \$ 10 , 000) , pero menos que setenta y cinco mil dólares (US \$ 75 , 000) , a continuación se va a ser responsable de ningún más de lo trescientos setenta y cinco dólares (US \$ 375) en gastos administrativos; y (c) si el reclamo / disputa sujeto a los procedimientos de arbitraje es superior a setenta y cinco mil dólares (US \$ 75,000) , entonces que va a ser responsable de administrativos los gastos de acuerdo w on la lista de tarifas comerciales prestados por la AAA. Usted reconoce y acepta que cada parte deberá pagar los honorarios y costos de sus propios abogados, expertos y testigos.

#### iv) ELECCIÓN DE LEY Y SEPARABILIDAD.

Este Acuerdo deberá ser gobernado por el Estados Unidos Federal de Arbitraje Ley y las leyes de la del estado de Utah. Si cualquier disposición de este Acuerdo se declara o se encontró a ser ilegal , inválido o nulo , tal disposición será ser ineficaces solamente a la medida que se está encontró ilegal , inaplicable o nula y el resto deberá permanecer totalmente exigible.

#### **ADVERTENCIA PELIGRO DE CAÍDA**

- Las personas con enfermedad de Alzheimer o la demencia , o aquellos que están sedado , confundido , o frágiles , están en mayor riesgo de perder su BALANC correo y caídas.

- (1) The arbitration of claim(s)/dispute(s) under this Agreement shall be pursuant to the American Arbitration Association's (AAA) United States Commercial Dispute Resolution Procedures and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (see [www.adr.org](http://www.adr.org) for their rules and procedures.)
- (2) The arbitration of any claim/dispute under this Agreement shall be in the State of Utah.
- (3) All administrative expenses of arbitration proceedings under this Agreement shall be divided equally between you and the Company, except that:
- (a) if the claims/dispute subject to the arbitration proceedings is less than ten thousand dollars (US\$10,000), you will be responsible for no more than one hundred twenty-five dollars (US\$125) in administrative expenses;
  - (b) if the claim/dispute subject to the arbitration proceedings is more than ten thousand dollars (US\$10,000) but less than seventy-five thousand dollars (US\$75,000), then you will be responsible for no more than three hundred seventy-five dollars (US\$375) in administrative expenses; and
  - (c) if the claim/dispute subject to the arbitration proceedings is more than seventy-five thousand dollars (US\$75,000), then you will be responsible for administrative expenses in accordance with the Commercial Fee Schedule provided by the AAA. You acknowledge and agree that each party shall pay the fees and costs of its own counsel, experts and witnesses.
- iv) CHOICE OF LAW & SEVERABILITY. This Agreement shall be governed by the United States Federal Arbitration Act and the laws of the state of Utah. If any provision of this Agreement is declared or found to be unlawful, unenforceable or void, such provision will be ineffective only to the extent that it is found unlawful, unenforceable or void and the remainder shall remain fully enforceable.

#### **WARNING FALL HAZARD**

- People with Alzheimer's disease or dementia, or those who are sedated, confused, or frail, are at increased risk of losing their balance and falls.
- Failure to comply with the instructions and **WARNINGS** could put the user(s) at risk of falling.