



Weighs only 7 lbs supports up to 300 lbs

Pesa sólo 7 libras y soporta hasta 300 libras

Pèse seulement 3.17 kg et supporte jusqu'à 136 kg

Handle Height Adjustment: 32.5" – 39"

Ajuste de altura del mango: 82.55 cm – 99.06 cm

Réglage de la hauteur de la poignée: 82,55 cm - 99,06 cm



Limited Lifetime Guarantee
Garantía Limitada de por Vida
Garantie à vie Limitée



Organizer Pouch

Bloqueo de ruedas giratorias

Roues pivotantes verrouillables



Push down to lock into place

Empuje hacia abajo para bloquear en su lugar

Poussez vers le bas pour verrouiller en place



EZ FOLD-N-GO WALKER-LITE +™



Folds for travel

Se dobla para viajar

Se plie pour voyager

California law requires the following notice:

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov
AVERTISSEMENT: Cancer et effet nocif sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov



Product #4380-BW



BE INDEPENDENT

SOYEZ AUTONOME

SE INDEPENDENTE

WARNING: PLEASE READ BEFORE USING THIS PRODUCT.

1. Serious injury or death can result if the Walker is not used in the intended manner. Stander, Inc. is committed to providing safe products and informing the user of ways to prevent accidents.

SAFETY PRECAUTIONS:

- ✓ Regularly check the walker to make sure there are no broken or loose parts.
- ✓ When traveling, make sure walker is not subject to being thrown or dropped. This could result in broken components which will make the product unsafe.
- ✓ Individuals should not use this product if they are in a high risk condition. High risk users include those who are not mentally coherent (including those individuals under medication), users who exceed weight limit conditions, or any condition that impairs their ability to use the walker.
- ✓ If you have any concerns or questions regarding these precautions, please contact Stander at 1-800-506-9901.

2. If you are suffering from an ailment or injury or are taking medications that affect your balance or ability to stand or sit down, you should first consult with a physician before using this product. If the product is not used properly, serious injury or harm could result.

3. Product is intended to provide minimal to moderate weight support while walking. This product is not intended to carry the full weight of an individual or for sitting.

4. Children should not be allowed to hang on or play with the product.

5. **DISCLAIMER:** Neither Stander, Inc. nor the manufacture is liable for any harm or injury that may result or has resulted from the improper use or assembly of the product.

LIMITED WARRANTY

Congratulations on your purchase of your Stander brand product. We hope that it will ease your daily living. Please read the following warranty statement for your protection.

Stander, Inc. warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in material and/or workmanship for 1 year from the date of purchase. During the warranty period, Stander, Inc. will correct any defects in material or workmanship, at no charge. The original purchaser, however, must prepay shipping cost. Any replacement parts will be new and are warranted for the remainder of the original warranty or thirty (30) days from the date of shipment, whichever is longer. The original purchaser must notify Stander, Inc. during the warranty period in writing of the defect in workmanship or material. This warranty is not transferable and covers only normal use. **NO SHIPPING CHARGES ARE REFUNDABLE.**

THE WARRANTY DOES NOT COVER THE FOLLOWING:

- Damage during shipment other than original shipment to retailer.
- Damage caused by unauthorized attachments, alterations, or modifications.
- Damage caused by the use of the product for purposes other than those for which the product was designed or intended.
- Damage caused by any other abuse, misuse, mishandling or misapplication.

Under no circumstances shall Stander, Inc. be liable for any special, incidental, or consequential damages based upon breach of this limited warranty, breach of contract, or strict liability.

THERE ARE NO WARRANTIES WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE HEREOF. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE), ARE HEREBY DISCLAIMED.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal right, and you may also have other rights, which vary from state to state. To obtain service under this warranty, you can reach Stander Inc. at 2410 S. Heritage Dr. Logan, Utah 84321 or call 1-800-506-9901. Visit our website at www.stander.com to view our other products.

PLEASE READ SAFETY PRECAUTIONS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT.

OPENING THE WALKER

MAINTENANCE: The walker has lubricant applied on the plastic joints that slide along aluminum tubing. This lubricant will eventually dry out and make the walker more difficult to open and close. When this occurs, the recommended lubricant to spray between the plastic joints and the aluminum tubes is WD-40 (see www.wd40.com). This can be obtained from stores such as Lowe's, True Value Hardware, Rite Aid, Office Depot, Home Depot, Target, Fred Myer, Napa, and Walgreens.

As shown in Figure 1, pull the Handles as far apart from each other as possible.

As shown in Figure 2, push down Locking Bracket to completely open walker.

NOTE: DO NOT SIT ON, OR PUT MORE THAN 5-LBS OF DOWNWARD WEIGHT ON THE LOCKING BRACKET.

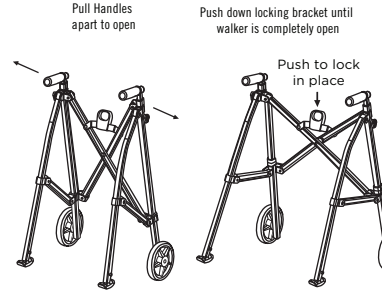


Figure 1 Figure 2

CLOSING THE WALKER

As shown in Figure 3, pull up on the Locking Bracket to initiate closing the walker. As shown in Figure 4, push Handles together to close the walker.

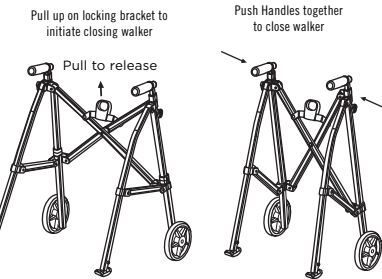


Figure 3 Figure 4

ASSEMBLING ADJUSTABLE HANDLES:

As shown in Figure 5, insert Handles into tube. Position the Handle up or down to the desired height. Align the hole in the Handle tube with the hole in the Front leg tube, insert the Knob and tighten as shown in Figure 5.

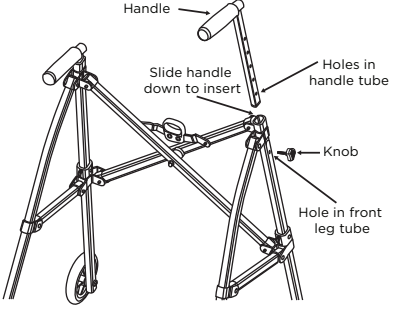


Figure 5

WALKER WHEEL ASSEMBLY:

As shown in Figure 6, following this order, insert the long bolt through one washer, the bushing, the wheel, the second washer and through the outside leg of the walker. Secure with the small bolt on the opposing end with the tools provided.

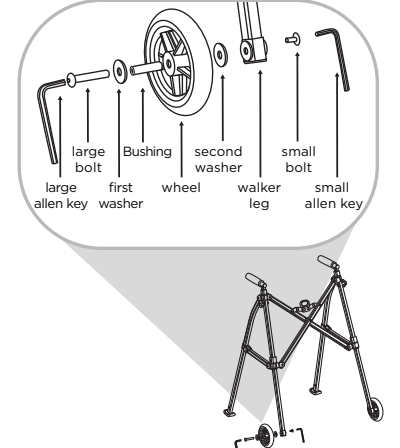


Figure 6



MISE EN GARDE : À LIRE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

1. L'utilisation non appropriée de ce déambulateur peut entraîner des blessures graves ou la mort. Stander Inc. s'engage à offrir des produits sécuritaires et à informer les utilisateurs des façons de prévenir les accidents.

MESURES DE SÉCURITÉ :

- ✓ Examiner régulièrement le déambulateur pour s'assurer qu'aucune pièce n'est brisée ou desserrée.
- ✓ Pendant les déplacements, s'assurer que le déambulateur ne risque pas d'être lancé ou échappé. Cela pourrait entraîner le bris de certaines pièces et rendre le produit non sécuritaire.
- ✓ Les personnes atteintes d'une affection à haut risque ne devraient pas utiliser ce produit. Les utilisateurs à haut risque comprennent les personnes mentalement incohérentes (y compris celles qui prennent des médicaments), les personnes qui dépassent les limites de taille ou de poids ou celles aux prises avec toute affection qui pourrait nuire à leur capacité d'utiliser ce déambulateur.
- ✓ Pour toute question ou préoccupation à propos de ces mesures de sécurité, communiquer avec Stander en composant le 1-800-506-9901.

2. Toute personne aux prises avec une affection ou une blessure, ou qui prend des médicaments qui altèrent l'équilibre ou la capacité à se tenir debout ou à s'asseoir, devrait consulter un médecin avant d'utiliser ce produit. L'utilisation non appropriée de ce déambulateur peut entraîner des blessures ou préjudices graves.

3. Le produit est destiné à fournir un support de poids minimal à modéré pendant la marche. Ce produit n'est pas destiné à supporter tout le poids d'un individu ou à s'asseoir.

4. Les enfants ne devraient pas être autorisés à se suspendre au produit ou à jouer avec le produit.

5. **EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ :** Ni Stander, Inc. ni l'usine de fabrication ne sont responsables de tout préjudice ou blessure que peut entraîner ou avoir entraîné un assemblage ou une utilisation inapproprié de ce produit.

GARANTIE LIMITÉE

Nous vous félicitons de l'achat de ce produit de marque Stander. Nous espérons qu'il facilitera votre vie quotidienne. Veuillez lire la déclaration de garantie suivante pour votre protection.

Stander, Inc. garantit au premier propriétaire que le présent appareil ne présentera aucune défaillance attribuable à un défaut des matériaux ou à un vice de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, Stander, Inc. remédiera sans frais à toute défaillance attribuable à un défaut des matériaux ou à un vice de fabrication. Le premier propriétaire devra toutefois assumer les frais d'expédition. Toute pièce de remplacement utilisée sera neuve et garantie pour le reste de la période de garantie originale ou durant trente (30) jours à compter de la date d'expédition, selon l'éventualité la plus reculée. Le premier propriétaire doit communiquer par écrit avec Stander, Inc. au cours de la période de garantie pour faire part de tout défaut dans les matériaux ou la fabrication. Cette garantie n'est pas transférable et ne s'applique qu'à une utilisation normale. **LES FRAIS D'EXPÉDITION NE SONT EN AUCUN CAS REMBOURSABLES.**

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES POINTS SUIVANTS:

- Les dommages survenus durant toute expédition autre que l'expédition originale au détaillant;
- Les dommages causés par tout accessoire, altération ou modification non autorisée.
- Les dommages causés par l'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles le produit a été conçu et auxquelles il est destiné.
- Les dommages causés par tout autre usage excessif, utilisation inadéquate, mauvaise manipulation ou mauvaise application.

En aucun cas Stander, Inc. ne peut être tenu responsable de tout dommage spécial, indirect ou consécutif en cas de violation de la présente garantie, de rupture de contrat ou de responsabilité sans faute.

AUCUNE GARANTIE NE S'APPLIQUE AU-DELÀ DE LA DESCRIPTION PRODUITE DANS LES PRÉSENTES. TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES (Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE LA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER), SONT DONC ANNULÉES PAR LA PRÉSENTE.

Certaines compétences n'acceptent pas les limitations liées à la durée des garanties implicites, les limitations exprimées ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à vous. La présente garantie vous confère des droits juridiques précis; vous pourriez aussi avoir d'autres droits pouvant varier selon votre territoire de résidence. Pour obtenir un service dans le cadre de cette garantie, vous pouvez communiquer avec Stander Inc. en composant le 1-800-506-9901. Vous pouvez également visiter notre site Web à l'adresse www.stander.com pour voir nos autres produits.

Veuillez lire les mesures de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit.



OUVERTURE DU DÉAMBULATEUR

ENTRETIEN : Le déambulateur a un lubrifiant appliqué sur les joints en plastique qui glissent le long des tubes en aluminium. Ce lubrifiant finira par sécher et rendra le déambulateur plus difficile à ouvrir et à fermer. Lorsque cela se produit, le lubrifiant recommandé à pulvériser entre les joints en plastique et les tubes en aluminium est le WD-40 (voir www.wd40.com). Cela peut être obtenu dans des magasins tels que Lowe's, True Value Hardware, Rite Aid, Office Depot, Home Depot, Target, Fred Myer, Napa et Walgreens.

Comme illustré à la Figure 1, tirez les poignées aussi loin que possible l'une de l'autre.

Comme illustré à la Figure 2, poussez le support de verrouillage vers le bas pour ouvrir complètement le déambulateur.

REMARQUE : NE PAS S'ASSEOIR OU METTRE PLUS DE 2,26 kg. DE POIDS VERS LE BAS SUR LE SUPPORT DE VERROUILLAGE.

Poignées de tirage à part pour ouvrir

Abaissez le support de verrouillage jusqu'à ce que le déambulateur est complètement ouvert

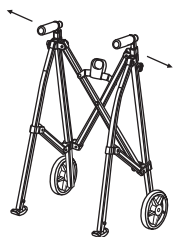


Figure 1

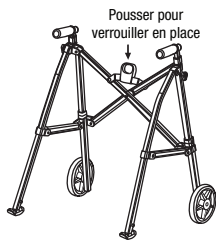


Figure 2

FERMETURE DU DÉAMBULATEUR

Comme illustré à la Figure 3, tirez sur le support de verrouillage pour amorcer la fermeture du déambulateur. Comme illustré à la Figure 4, poussez les poignées ensemble pour fermer le déambulateur.

Tirez sur le support de verrouillage pour lancer le déambulateur de fermeture

Poussez les poignées ensemble fermer walker

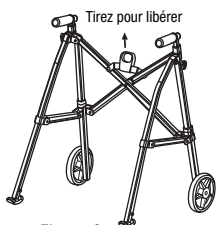


Figure 3

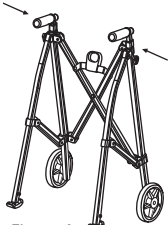


Figure 4

ASSEMBLAGE RÉGLABLE POIGNÉES :

Comme illustré à la Figure 5, insérez les poignées dans le tube. Positionnez la poignée vers le haut ou vers le bas à la hauteur souhaitée. Alignez le trou du tube de la poignée avec le trou du tube du pied avant, insérez le bouton et serrez comme illustré à la Figure 5.

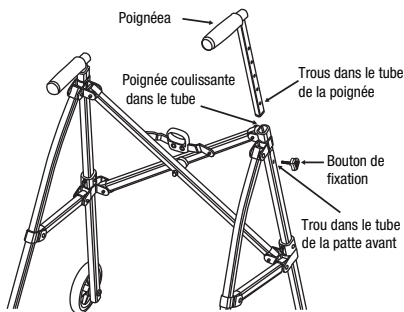


Figure 5

DÉAMBULATEUR ASSEMBLAGE DES ROUES :

Comme illustré à la Figure 6, en suivant cet ordre, insérez le long boulon à travers une rondelle, la manchon de douille, la roue, la deuxième rondelle et à travers le pied extérieur du déambulateur. Fixez avec le petit boulon sur l'extrémité opposée avec les outils fournis.

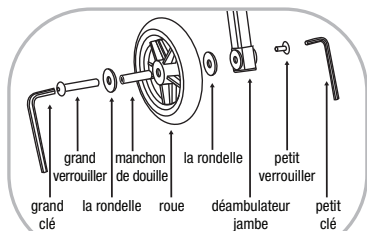




Figure 6





Created in Adobe Illustrator 2020

Colors:

 **BLUE**
C=75
M= 0
Y=15
K= 5

 **ORANGE**
C=0
M= 50
Y=100
K= 0

 **GRAY**
C=47
M= 38
Y=39
K= 3

 **BLACK**
C=0
M= 0
Y=0
K= 100

Fonts:

Kapra Neue Ligh – Light

MONTSERRAT SEMIBOLD – REGULAR

RALEWAY – MEDIUM

HELVETICA NEUE LT STD – 57 CONDENSED

TRADE GOTHIC – MEDIUM

Contact:

Vendor: Stander, Inc.

Vendor Rep: Adam Scott

Email: adamscott@stander.com

Phone: 435-764-1365